



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



ITM

Servicios e insumos
tecnológicos para la movilidad



NUESTROS PRODUCTOS

QUIENES SOMOS



- VISION •
- OBJETIVOS •
- VALORES •

CALZADO ORTOPEDICO y ORTESIS PLANTARES



- MEMO Shoes •
- BILLY Footware •
- AURELKA •



- FROMTHOTICS •
- Deporte •
- Cada Día •
- Niños •

MOVILIDAD POSTURA



- BOX Wheelchairs •
- MYWAM •
- STABILO •
- BEROLLKA •



BEROLLKA
bewegt





¿ QUIENES SOMOS ?

Somos **ORTOPEDIA ITM**, una compañía argentina, comprometida con el bienestar de las personas. Nuestra misión es poder facilitar y brindar a nuestros pacientes la mejor alternativa posible para mejorar su calidad de vida, con el fin de que logren alcanzar su máximo nivel de movilidad e independencia, ofreciendo productos de primera calidad y última tecnología.

Creemos en el esfuerzo puesto en lograr lo que a primera vista parece imposible. Por eso, nos involucramos personalmente en la atención de cada paciente, trabajando en coordinación con el equipo médico, para lograr una solución a medida; garantizando así el máximo nivel posible de movilidad e independencia.

Nos relacionamos estratégicamente con proveedores nacionales e internacionales, que comparten nuestros valores y trabajan con los mismos estándares de calidad y compromiso.

Nuestro equipo de trabajo se especializa en calzado ortopédico, marcha, sedestación, postura y posicionamiento; se involucra en cada caso, con el compromiso y la dedicación que nos caracteriza. Como así también se capacitan y actualizan en todas sus especialidades, logrando estar siempre a la vanguardia, para poder brindar a cada uno de nuestros pacientes, equipamientos y soluciones de primera calidad.

Somos representantes exclusivos de las firmas BOX Wheelchair, MEMO Shoes, BILLY Footware, AURELKA, MYWAM, PROGEO, STABILO, FROMTHOTICS, entre otros.

- Recomendados por los especialistas.

Los zapatos y zapatillas **MEMO** son la evolución del calzado ortopédico infantil. Fabricados con materiales naturales, cuentan con una función de diagnóstico única a través del sistema de monitoreo de sus suelas. Los **MEMO** corrigen los trastornos del pie y previenen problemas futuros, con el máximo confort y en diseños divertidos y alegres.

Las anomalías en la postura pueden ser a menudo el resultado de las quejas de pie, siendo entre las más comunes:

- Vagilidad del tarso
- Pies planos abducidos
- Deformación esquelética
- Talipes Calcaneovalgus de piso
- Deformación de la estructura suave
- Debilidad muscular y/o sobrecarga del pie
- Transferencia de funciones al sistema ligamentoso-capsular

The logo for MEMO, featuring the word "memo" in a white, lowercase, sans-serif font. Above the letter "o" are four small, white, curved lines representing a smile or a set of teeth. The logo is set against an orange rectangular background.

memo





DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Los zapatos **MEMO** permiten una estabilización fisiológica óptima del pie ayudando a aprender a caminar apropiadamente sin que se resienta y asegurando el correcto desarrollo de las extremidades inferiores, tratando la mayoría de las dolencias comunes de los pies y deformidades de las articulaciones de la rodilla. Permite un diagnóstico temprano por su suela que permite monitorear la evolución de la marcha del paciente y una rápida corrección en los pies durante la fase de crecimiento de manera simple y dinámica.

▶ Efecto Profiláctico

La construcción se centró en una posición apropiada de ejes del calcáneo, maléolos y rodilla, adaptándose a las necesidades de diferentes edades y grupos. La altura del talón junto con el grosor de la suela no supera los dos centímetros permitiendo la utilización de “talón de Thomas” como característica estándar en la prevención de la valguia del pie.

▶ Estética

Variedad de estilos con diferentes formas y colores, desde sandalias bajas para el verano, pasando por zapatillas, hasta botas. Permite un amplio espectro de elección de calzado, siempre priorizando el modelo que mejor se ajuste funcionalmente al paciente.

▶ Como solicitar Calzado Ortopédico MEMO Shoes

Un par de zapatos ortopédicos con velcro, retro pie neutro, íntimo contacto, suela de goma, contrafuerte rígido de polipropileno supra maleolar y ante pie flexible; confeccionados en cuero; Diagnóstico, prueba, modificaciones y entrega a cargo de técnico especializado y autorizado. Seguimiento de Evolución.

CONFECCIÓN DEL CALZADO

memö

- ▶ Protección y estabilizador de tobillos, por medio de una talonera termoplástica. Logrando de esta manera llevar el calcáneo a neutro.
- ▶ Ajustes por fijación de abrojo, logrando así adaptarse a cada pie.
- ▶ Construcción de un sistema anti choques doble para absorber impactos extremos.
- ▶ Posibilidad de aplicar plantillas adecuadas, del sistema MEMO para corregir defectos en la marcha.
- ▶ Prevención de pie plano, suela construida sobre tacón de Thomas.
- ▶ Suela anti deslizante, de puntera ancha; confortable, cómoda y estable. Sistema de diagnóstico único patentado. Flexible, trabaja sobre los ejes adecuados.
- ▶ Comodidad, fabricados en piel natural con espuma y elementos superiores. Para evitar Exceso de presiones y roses en zonas de mayor sensibilidad.

Talles disponibles del 18 a 40.





Moda Diseño Inclusión Funcionalidad

Utilizando el diseño universal y la innovadora tecnología Flip Top, **BILLY** Footwear cambia el juego uniendo la moda y la función, difuminando la línea entre adaptativo y no adaptativo. Pensado para las masas, los zapatos con cremallera de BILLY Footwear revolucionan la forma en cómo se pone y se quita el calzado. No más velcro. No más intervenciones en tus zapatos. Es momento de pisar sin obstáculos, ser empoderado, y vivir tu historia como debe ser contada.



● FLIP

La innovadora tecnología FlipTop cambia el juego del calzado. Sumando a la moda la funcionalidad, los zapatos con cremallera de **BILLY** Footwear revolucionan la forma en que se pone y se quita el calzado.

● GO!!

Todos tenemos una historia. Y los zapatos de **BILLY** Footwear se abren como un libro. Cada vez que entras, estás entrando en la historia de tu vida. Y cada vez que cierras los zapatos, dices: "¡Sí!" a la aventura por delante.



● ZIP

Los zapatos de **BILLY** Footwear incorporan una cremallera que va a lo largo del exterior y alrededor del dedo del pie, permitiendo que la parte superior de cada zapato se abra y se doble por completo. Por lo tanto, el usuario puede colocar su pie sobre la plantilla sin obstáculos. Luego, con un tirón de la cremallera, el zapato cierra y asegura la parte superior del pie del usuario. Es sencillo. Es fácil.





DESCRIPCIÓN TÉCNICA



La tecnología Flip Top que proporciona un fácil acceso dentro y fuera de los zapatos

- Cierre de cremallera desde los dedos, recorriendo el lateral. Con cordones para ajuste.
- Plantilla acolchada; Suela exterior duradera y flexible; contrafuerte rígido.
- Tabla de medidas que contemplan largo, 3 anchos distintos (independientes del largo) y alto.
- 4 Segmentos de talles Toddler (primeros pasos), Niñas/os, Mujeres y Hombres. **Talles disponibles del 20 a 46.**
- Diversidad de modelos: Zapatillas de caña alta y baja; estilo tipo Running, Zapatillas Urbanas, de Vestir y Botas.

● Como solicitar Calzado Ortopédico BILLY Footwere

Un par de zapatos Ortopedicos, Para uso en Ortesis. Cierre longitudinal de apertura total, Supre o Infra Maleolar. Medidas de largo, alto de antepie y retropie. Suela rigida con memoria de plantilla retardada. Confrafuerte reforzado. Diagnostico, prueba, modificaciones y entrega a cargo de técnico especializado y autorizado. Seguimiento de Evolución.

● AURELKA

Desde hace más de 15 años especializados en la producción de calzado preventivo y ortopédico para los más pequeños. Tratando la salud de los niños como nuestra prioridad, nos esforzamos por lograr niveles cada vez más altos de adaptación a sus necesidades, lo que resultó en decisión de establecer la marca.

Esta línea de productos ortopédicos fue creada siguiendo las recomendaciones de ortopedistas y fisioterapeutas. La base de los modelos son los diseños proporcionados en el catálogo, que incorpora las últimas tendencias del mercado. Por lo tanto, incluso un niño que necesita calzado con funciones de corrección avanzadas no necesita sentirse incómodo en compañía de sus amigos, sino que puede sentirse orgulloso de usar nuestro calzado.

Cada par se hace a medida en un pedido individual con respecto a las recomendaciones ortopédicas, así como una medida precisa del pie del niño. Los clientes pueden elegir entre las ofertas que cubre más de una docena de correcciones. Sin embargo, cuando surge la necesidad, se tiene la capacidad de atender incluso los pedidos más especializados y atípicos.

Esforzándose constantemente por ampliar el conocimiento sobre las formas de garantizar la salud de los pies de los niños. Regularmente participan de simposios médicos.

The background of the entire page is a photograph of three children standing in front of a colorful, abstract wall. On the right, a boy in a grey hoodie and red pants stands with his hands in his pockets. In the center, a girl in a black jacket and a pink scarf smiles. On the left, another boy in a dark jacket and blue jeans is partially visible. The Aurelka logo, in white lowercase letters with a registered trademark symbol, is positioned in the upper right corner within a red rounded rectangle.

aurelka®



aurelka®

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



- **Tacón de Thomas Normal e Inverso**

Da como resultado solo una ligera elevación del talón en relación con los dedos de los pies.

- **Modificación de Tacón de Thomas**

Funciona igual que el talón de Thomas para la supinación excesiva, solo que al revés, es decir, alinea la espinilla hacia adentro desde el eje medial.

- **Tacón de Thomas para supinación excesiva**

Se utiliza para tratar la inclinación del eje de la parte inferior de la pierna hacia afuera desde el eje medial. El grosor del talón puede variar según la recomendación del ortopedista. El talón se ajusta a la suela.

- **Contrafuerte reforzado**

Este elemento introduce una elevación significativa del contrafuerte estándar, el mostrador está hecho de un material extremadamente rígido, lo que lo hace funcionar como corsé. Hay dos variedades, lo que garantiza la rigidez del talón o el antepié, respectivamente.

- **Refuerzo Medial y Lateral reforzado**

-I: La longitud de los refuerzos es $\frac{2}{5}$ de la plantilla, mientras que su altura NO exceda la altura del talón.

-II: El refuerzo en el lado medial es $\frac{3}{5}$ de la plantilla, mientras que en el lado lateral a $\frac{2}{5}$ del zapato, su altura es igual a la altura del talón.

-III: La longitud del refuerzo en el lado medial es $\frac{7}{10}$ de la plantilla del zapato, mientras que en el lado lateral a $\frac{2}{5}$ de la plantilla del zapato, su altura es similar a las variantes I y II.

-IV: El refuerzo en los lados medial y lateral es igual a $\frac{3}{5}$ de las plantillas del zapato, la altura en la sección del talón es igual a $\frac{2}{3}$ de la longitud del pie.






• Pares de zapatos para pies de diferentes tamaños

Esta modificación de calzado se proporciona en el caso de pies de diferentes tamaños, p. Ej. cuando el tamaño del zapato derecho es 25, mientras que el del izquierdo es 27. Cuando la diferencia de tamaño entre los pies es significativa, el grosor del zapato también es diferente. Dado que tiene una gran influencia en el aspecto visual del producto, teniendo en cuenta el bienestar de nuestros clientes, hacemos todo lo posible para que estas diferencias sean lo más insignificantes posible.

aurelka®

• Cuña lateral - Pronación

- El elevador instalado en el interior del zapato, siempre que su altura no supere 1 cm en el retropié y 0,5 cm en el antepié.
- El levantamiento en la suela (cualquier altura disponible).
- Una sección de la elevación dentro del zapato (en los casos en que la corrección sea menos visible), la parte restante de la elevación del zapato se incorpora a la suela. La elevación de la plantilla no puede superar 1 cm en el retropié y 0,5 cm en el antepié.
- El levantamiento siempre cuenta con una suela de balancín a la altura de la cabeza del primer metatarsiano. También es posible colocar un balancín de talón, que facilita el golpe del talón en elevaciones más altas.

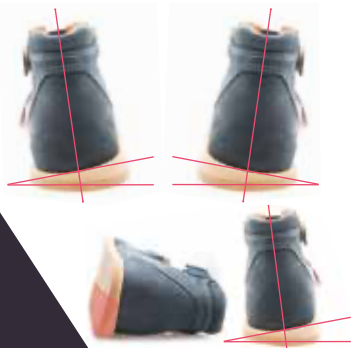

• Supinación del retropié

Esta corrección implica la elevación del borde medial del pie. Como sugiere el nombre, solo afecta al retropié. Puede incorporarse en la suela o ajustarse dentro del zapato, en la plantilla.

• Pronación del retropié

Esto es lo contrario de la supinación del retropié (subpronación). Implica el cambio de posición del borde lateral del pie con respecto al eje medial.

• Cuña medial - Supinación

La cuña puede incorporarse a la suela o colocarse dentro del zapato, en la plantilla. Su longitud y altura pueden variar. Implica la elevación del borde medial del pie. La cuña colocada dentro del calzado no puede superar 1 cm de altura (en zapatos abiertos) y 0,5 cm (en zapatos de antepié cerrados).

aurelka®

Almohadillas metatarsianas

Utilizado de forma profiláctica por mujeres embarazadas y personas en trabajos de "pararse y caminar". La almohadilla alivia tres cabezas de metatarsianos (II, III, IV), contrarresta la formación de dedos en martillo y de antepié convexo. El elemento se pega debajo del forro en el lugar apropiado del pie. La ubicación de la almohadilla se determina sobre la base de una huella con su contorno marcado.



Zapatos Anti-Varus Forma Simétrica

El último tiene una forma neutra (no está en aducción ni en supinación), no presenta el hueco medial a nivel del arco longitudinal del pie. Los contadores del lado medial del pie se alargan hacia la cabeza del primer metatarsiano (el punto de formación de un juanete). El zapato suele estar equipado con un corsé rígido.

Forma Abducida Anti-Varus

El último se sitúa en la posición de abducción del antepié (provocando la rotación hacia fuera del antepié). Los contadores del lado medial del pie se alargan hacia la cabeza del primer metatarsiano (el punto de formación de un juanete). El zapato suele estar equipado con un corsé rígido.

Supinación del arco longitudinal

El elemento corrector se coloca dentro del zapato debajo del forro al nivel del arco longitudinal. Su altura puede variar según las necesidades individuales del paciente.

Elemento estabilizador (copas del talón)

Este elemento correctivo estabiliza la posición correcta del talón en relación con el eje de la parte inferior del pie (creando un soporte reforzado para el talón). Está pegado debajo del revestimiento del retropié.





aurelka®

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

● Zapato Bota - Ortesis

El uso de ortesis y calzado ortopédico adecuados es fundamental para inclinar a los pacientes a la posición erguida y para que aprendan a caminar. Por lo general, la órtesis y el calzado son fabricados por productores separados, por lo que el resultado final se desvía de la solución optimizada que requiere el paciente. El cierre de la órtesis puede estar desalineado en el zapato, el cierre y la forma del zapato pueden sobrecargar algunos elementos de la órtesis, mientras que la inserción repetida de una órtesis rígida puede dañar el zapato. Suele no haber una oportunidad previa de comprobar si ambos elementos funcionan bien juntos mientras se camina. Ventajas del zapato-órtesis Aurelka:

- Un único productor es responsable de la correcta fabricación del equipo ortopédico; se elimina el problema de los cierres dobles de ortesis y calzado.
- El sistema de cierre BOA® permite que el paciente o los asistentes se calcen los zapatos con mayor facilidad.
- Durante la prueba de marcha en el suelo, se puede evaluar la mejora en la eficiencia de la marcha (la carga sobre los pies, la posición de la pelvis y el torso); si es necesario, se puede hacer un ajuste adicional con la aplicación de los elegidos correctamente tacones ajustados en la suela para asegurar mejora más amplia.
- Brinda la oportunidad de determinar corregir el nivel de acortamiento del miembro inferior y proporcionar la alineación correcta.



● Como solicitar Calzado Ortopédico AURELKA

Un par de zapatos ortopedicos con distintos tipos de cierre de abrojo, cierre de hebilla, cierre de cordones , cierre de cremallera y BOA. Confeccionados en cuero natural, suaves, flexibles y transpirables; sin costuras internas. Correcciones en la suela y la plantilla, Inalterando la parte superior del calzado. Tacon de Thomas incorporado, Contrafuertes Rígidoss de altura variable. Estabilizadores latero-internos y externos. Diagnostico, prueba, modificaciones y entrega a cargo de técnico especializado y autorizado. Seguimiento de Evolución.

aurelka®

CONFECCIÓN DEL CALZADO

Todos los zapatos están hechos de cuero ecógico y microfibra por lo que son más suaves, más flexibles y se ajustan mejor a la forma del pie. Generando un entorno natural para los pie, transpirable. Son ultraligeros debido a los materiales utilizados. No hay costuras en el interior de los zapatos, lo que garantiza una sensación de comodidad y evita las abrasiones de la piel exterior.

Fácil de poner gracias a su diseño especial. Diferentes cierres disponibles: cierre de rabrojo, cierre de hebilla, cierre de cordones, cierre de cremallera y BOA®.

Resistencia al agua gracias a la membrana TE-POR (en una selección de modelos).

Contrafuerte Rígido de altura variable, Estabilizadores mediales, y latero-interno y externos de distintos largos. Todas las correcciones van entre la suela y la plantilla, evitando modificar la parte superior.

Las suelas producidas por la reconocida empresa Vibram® garantizan la elasticidad, además de ayudar en el entrenamiento del arco del pie longitudinal poco desarrollado en los niños. Dan flexibilidad - nuestros zapatos se doblan correctamente en la sección correspondiente al eje de las articulaciones metatarsofalángicas.

Ellos ayudan a estabilizar el pie!!



The Aurelka logo is displayed in white lowercase letters within a red rounded rectangular box.

aurelka®

VALOR AGREGADO

The Memo logo is shown in white lowercase letters with a small footprint icon above the 'o', set against an orange rounded rectangular background.

memö

Cuando nuestro paciente asiste a su turno, es un acontecimiento especial para cada familia, por ello y comprendiendo esta emoción, realizamos una evaluación muy completa de la marcha, uso cotidiano y exploración ocular clínica. Dando y Comprendiendo cada aspecto a tener en cuenta brindamos asesoramiento y hacemos participe a cada familia.

Toda esta evaluación nos ayuda a detectar posibles lesiones, y falencias a tratar desde el calzado, algún arreglo o posteo necesario.

Es vital poder detectar estos puntos ya que no solo agregan valor a nuestro trabajo, sino también a que el equipamiento deseado termine de cerrar y cumplir su objetivo.

Tanto en BILLY, MEMO y AURELKA, realizamos posteo, ortesis plantares, arreglos, refuerzos y contenciones especiales; adaptados a cada paciente. Nuestro objetivo es mejorar en calidad y calidez humana, donde nos destacamos en el trato y el acompañamiento para cada familia y paciente.

Contamos con una amplia gama de modelos y talles.



FormthoticsTM

Custom Medical Orthotics



Foot Science
International





ORTESIS PERSONALIZADOS

Nuestros pies son bastante importantes aunque demos por sentado lo mucho que hacen por nosotros todos los días.

¿Sabías que una persona tiene más del 25% de los huesos de los pies?

Al estar en el negocio de los pies, hemos investigado las mejores opciones en ortesis que complementarán los zapatos y brindarán comodidad, equilibrio, estabilidad, mayor rendimiento y resistencia a los pies de las personas.

Entonces, **¿en qué se diferencian las ortesis de pie Formthotics de otras marcas?** Las diferencias entre todas estas Ortesis para los pies son sorprendentes, y un poco abrumadoras si apenas estás comenzando a buscar cuál es la adecuada para tus pies.

Nuestros productos médicos Formthotics pueden ayudar con el dolor en los pies, las rodillas, la cadera y la espalda baja. Si siente dolor, es importante que lo evalúe un profesional médico que pueda ayudarlo a moverse cómodamente y sin dolor. Los productos médicos de Formthotics suelen formar parte de un plan de tratamiento que puede incluir la personalización experta de su Formthotics médico, ejercicios de fortalecimiento y un cambio en los hábitos de estilo de vida. Estos cambios le ayudarán a mejorar antes, a controlar el ejercicio continuo mientras esté lesionado y a mejorar su técnica para ayudar a prevenir más lesiones en el futuro.

Formthotics son ortesis plantares personalizados, diseñados para brindarle el apoyo y la comodidad que necesita. Con un diseño y un proceso de fabricación únicos, Formthotics ha establecido características distintivas que crean las mejores ortesis para pies que se adaptan naturalmente a sus pies. Los Formthotics están diseñados y fabricados por Foot Science International en Nueva Zelanda.



FormthoticsTM
Custom Medical Orthotics

DESCRIPCIÓN TÉCNICA



Antimicrobiano

Formthotics contiene Ultra-Fresh, que inhibe el crecimiento de bacterias y hongos que causan olores y manchas. La espuma de celda cerrada también evita que la humedad penetre en la superficie, manteniéndolas ligeras, sin olor y fáciles de limpiar.



Soporte del arco

El soporte para el arco asegura que su pie esté apoyado en una posición neutral, brindando soporte para el arco longitudinal, lateral y transversal debajo de las cabezas de los metatarsianos. El soporte para el arco de Formthotics está asistido por una forma única de lágrima fresada en la espuma en el lado inferior de Formthotics. Fresar el material desde el borde exterior (lateral) mejora el soporte en el borde interior (medial).



Copa del talón

La copa profunda del talón crea un ajuste tridimensional ceñido alrededor del talón, lo que ayuda con la absorción de impactos y minimiza el golpe del talón.

La copa de talón profundo de Formthotics brinda mayor soporte y control alrededor de su talón, creando un ajuste más preciso a su calzado que se adapta a sus pies.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Performance

Los formtopóticos ayudan a prevenir la fatiga, permitiendo al usuario permanecer activo durante más tiempo, ya sea una caminata, una carrera o un partido de fútbol, o cualquier actividad de amateur y profesional.



Estabilidad

El diseño único y la espuma termoformable de Formthotics mejoran el equilibrio, la estabilidad y la función saludable al crear una interfaz de distribución de carga de contacto total entre el pie y la ortesis, mejorando así la información sensorial y la propiocepción articular.



Termoformable

La espuma **Formax** proporciona comodidad y estabilidad para su búsqueda. Es una espuma termoformable que se amolda a la forma única de su pie, aumentando el contacto de su pie con el suelo para una mejor retroalimentación, estabilidad y confianza.






PERSONALIZACIÓN Y AJUSTE

El termoformado optimiza el rendimiento de Formthotics creando un ajuste ceñido y personalizado entre el pie y el calzado. Las ortesis son moldeables a temperaturas relativamente bajas. En comparación, la mayoría de las otras plantillas ortopédicas de espuma moldeadas por compresión, generalmente espuma EVA (acetato de etileno y vinilo), no se pueden moldear ni remodelar de manera efectiva. El proceso de fabricación por moldeo por calor y compresión altera la estructura celular de EVA, evitando que la espuma mantenga una nueva forma cuando se coloca; esto obliga a la espuma a volver a la forma original fabricada.

Adaptabilidad al pie, brindando la mejor comodidad y equilibrio que se siente más natural que las ortesis personalizadas más duras. Esta comodidad proporciona el mejor apoyo durante las actividades neuromusculares. Las ortesis Formthotics han sido utilizadas por muchos tipos diferentes de pies, incluidos aquellos que tienen un arco alto, un arco natural, un arco plano, pies que pronan (enrollan hacia adentro), pies que supinan (enrollan hacia afuera) y aquellos cuyas rodillas tienen tendencia a llegar.

Los Formthotics se moldean térmicamente al pie para brindar un ajuste verdaderamente personalizado, mejor soporte y control.

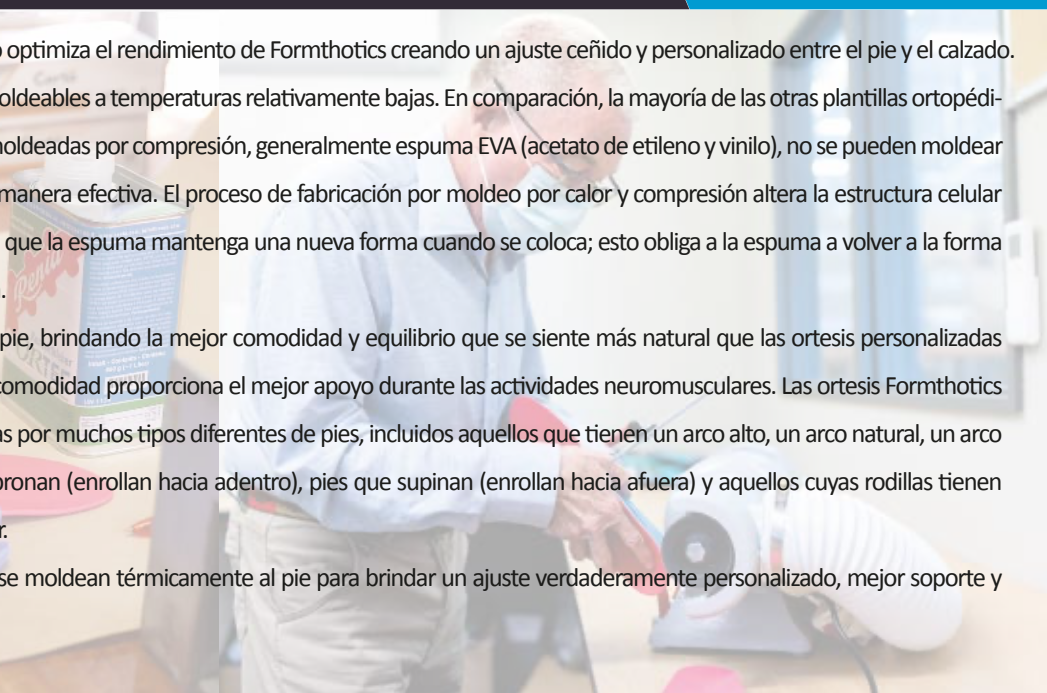

Formthotics

Custom Medical Orthotics

MATERIALES Y TRATAMIENTO

Material

Los Formthotics están hechos de un material único, **“FORMAX”**, patentado exclusivamente por Foot Science International. Es precisamente este material el que confiere los atributos únicos a Formthotics. Se puede resumir fácilmente en ligereza y sujeción. Este material también tiene una forma personalizada para los pies de cada persona mediante moldeo por calor.

La espuma Formax se termoforma a temperaturas relativamente bajas y conserva su forma moldeada personalizada. Esta espuma única crea un ajuste perfecto entre el pie y el calzado, maximizando el rendimiento ortopédico. Esta espuma ligera y completamente flexible se mueve con la persona. Estas plantillas ortopédicas están fresadas en 3D a partir de espuma Formax, lo que garantiza que brinden una distribución constante de soporte en todo el sistema esquelético del pie.

Higiene

Estas plantillas están tratadas con **“Ultra-fresh”**, que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos que crean olor y manchas en los pies, manteniendo tus pies sanos. Además, los Formthotics no están cubiertos con tela que pueda tender a ser un nido para hongos y bacterias. Además son fácilmente lavables con agua y jabón.





FormthoticsTM
Custom Medical Orthotics

MODELOS Y TIPOS

Deporte

Las ortesis personalizadas le ayudan a obtener el máximo disfrute y rendimiento en su deporte. Las personas que utilizan Formthotics Sport informan de una mejor estabilidad, una mejor sensación debajo del pie, mayor calidez y comodidad y menos fatiga muscular.

Cada día

Cuando estás de pie durante largos períodos de tiempo, las plantillas Formthotics Everyday te ayudan a sentirte mejor. Previenen el dolor y las molestias, aumentan el soporte y mejoran el ajuste. Comodidad excepcional para héroes de larga data.

Niños

Formthotics Youth está diseñado específicamente para pies jóvenes en crecimiento, que pueden ser sensibles y requerir comodidad y apoyo adicionales a medida que se desarrollan y alcanzan el tamaño adulto alrededor de los 12 años.

Comodidad y equilibrio

Los Formthotics forman una superficie de contacto estrecha entre la planta de su pie y el zapato para que tenga una mayor superficie de contacto con el suelo.

Tu pie tendrá una mayor sensación de dónde está y sabrás más sobre cada movimiento. Esto permite que una persona disfrute de menos puntos de presión en los pies, alejando el peso del cuerpo de la punta del pie y el talón, dos áreas pequeñas que tienden a soportar la mayor parte del peso del cuerpo.



BOX WHEEL CHAIR

By Mike Box

La comodidad, el diseño y la funcionalidad de la silla de ruedas BOX son el resultado de su diseño a medida y fabricación personalizada, responden a las necesidades particulares de cada usuario.


Desde el uso cotidiano tanto para niños, adolescentes y adultos; configurable con y sin suspensión. Como también para el uso en deportes de alto rendimiento como en iniciación: Tenis, Basquet, Quad Rugby, Baile y WCMC.

Verdaderamente son para TODO terreno, super estables su diseño único le impide el vuelco hacia adelante. A demás de contar con todos los accesorios de configuración posible.

Cada silla es construida desde cero en Estados Unidos.

Fuertes, Livianas, Durables, a prueba de TODO.



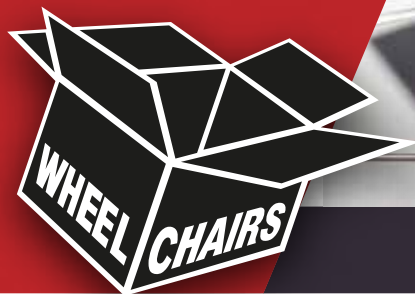

BOX RIGID



• Como solicitar la Silla de Ruedas BOX Rígida:


Silla de ruedas uso diario, cuadro rígido, fabricada a medida enteramente, en aluminio Alcoa aeronáutico; plegado frontal. Asiento tipo ergo seat y camber opcional acorde al usuario.

Ruedas traseras de 24" o 25" llanta y masa fabricada en aluminio doble pared de rayos en carbono, cubiertas de alta presión, ejes tipo quick-release y receptores de acero inoxidable; aro de empuje anodizado de aluminio. Con frenos tipo push locks o scissor.

Caster delanteros con doble rodamiento bilndado por cada lado, incorporados al cuadro, disposición en el espacio que evitan el vuelco de la silla hacia delante, ruedas de 4x¼ o 5x¼ anti pinchaduras, con horquillas fijas.

Respaldo de cuero natural, con cintas de ajuste múltiple, tapiado trasnpirable cobertor. Base de asiento en lona de kevlar ajustable en tensión, con almohadon de espuma liviana y funda resistentes a la incontinencia.

Peso no mayor a 4,5kg

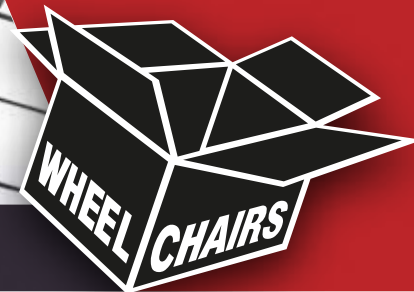

BOX SUSPENSIÓN

• Como solicitar la Silla de Ruedas BOX Suspensión:

Silla de ruedas uso diario, cuadro rígido, fabricada a medida enteramente, en aluminio Alcoa aeronáutico; plegado frontal. Sistema de suspensión trasera integrado, por doble amortiguador (regulable en resistencia) y rótulos. Eje de camber opcional, regulable en sentido antero posterior. Asiento tipo ergo seat acorde al usuario.

Ruedas traseras de 24" o 25" llanta y masa fabricada en aluminio doble pared de rayos en carbono, cubiertas de alta presión, ejes tipo quick-release y receptores de acero inoxidable; aro de empuje anodizado de aluminio. Con frenos tipo push locks o scissor.

Caster delanteros con doble rodamiento blindado por cada lado, incorporados al cuadro, disposición en el espacio que evitan el vuelco de la silla hacia delante, ruedas de 4x¼ o 5x¼ anti pinchaduras, con horquillas fijas.


Respaldo de cuero natural, con cintas de ajuste múltiple, tapizado transpirable.

Cobertor. Base de asiento en lona de kevlar ajustable en tensión, con


almohadón de espuma liviana y funda resistentes a la incontinencia.

Peso no mayor a 9,5kg



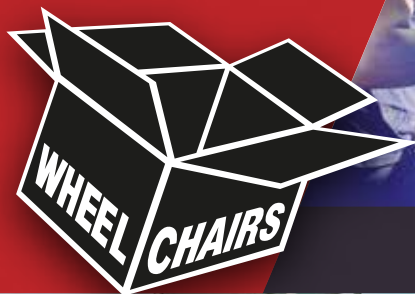

BOX DEPORTIVAS

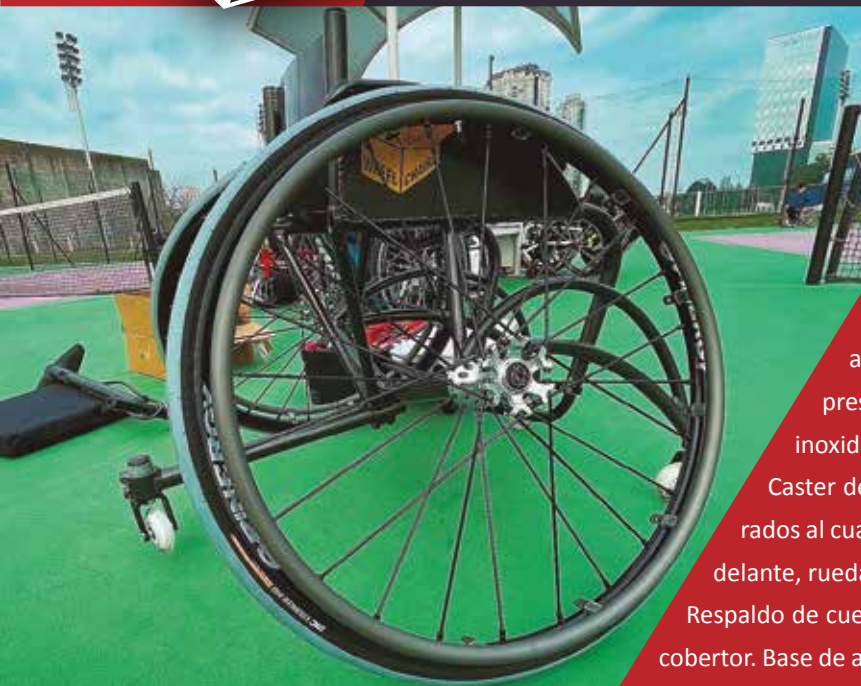


● Como solicitar la Silla de Ruedas BOX Deportiva:

Silla de ruedas deportiva para alto rendimiento, cuadro rígido, fabricada a medida enteramente, en aluminio Alcoa aeronáutico. Configuración según clasificación, posición de juego y aptitudes del usuario. Asiento tipo ergo seat y camber opcional acorde al usuario. Garafaropas soldados.

Ruedas traseras de 24", 25", 26" y 27" llanta y masa fabricada en aluminio doble pared de rayos en carbono, cubiertas de alta presión, ejes tipo quick-release de 1/2 o 5/8 y receptores de acero inoxidable; aro de empuje anodizado de aluminio.

Caster delanteros con doble rodamiento blindado por cada lado, incorporados al cuadro, disposición en el espacio que evitan el vuelco de la silla hacia delante, ruedas de 76mm Roller, con horquillas fijas.

Respaldo de cuero natural, con cintas de ajuste múltiple, tapizado transpirable cobertor. Base de asiento en lona de kevlar ajustable en tensión, con almohadón Base de espuma y funda resistentes a la incontinencia.

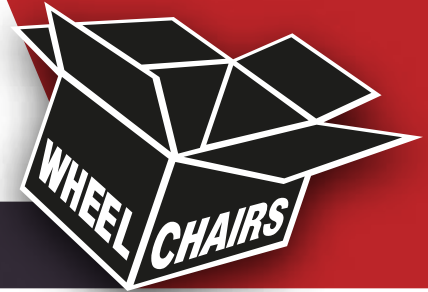


BOX ACCESORIOS

Amortiguación Recoil, es un sistema de amortiguación que absorbe el impacto hacia atrás. Por medio de un resorte encapsulado podemos regular la resistencia de impacto y resistencia.

- Horquillas delanteras con suspensión tipo **"Recoil" 4x1/4"**, regulables en resistencia; con ruedas anti pinchaduras.
- Horquillas delanteras con suspensión tipo **"Recoil" 4x2/1"**, regulables en resistencia; con ruedas anti pinchaduras pisada ancha OFF Road (todo terreno).



- Cubiertas todo terreno de 22" y 24".
- Cubiertas deportivas y uso diario, de todas las medidas.
- Aros de autopropulsion vinilicos, anodizados o especiales.
- Llantas y masas de carbono 22", 24" 25" 26" y 27".
- Frenos D's Locks, sistema de traba por perno, ideal para pendientes.
- Bolso porta objetos.
- Manijas de acompañante extraibles y Anti vuelco.

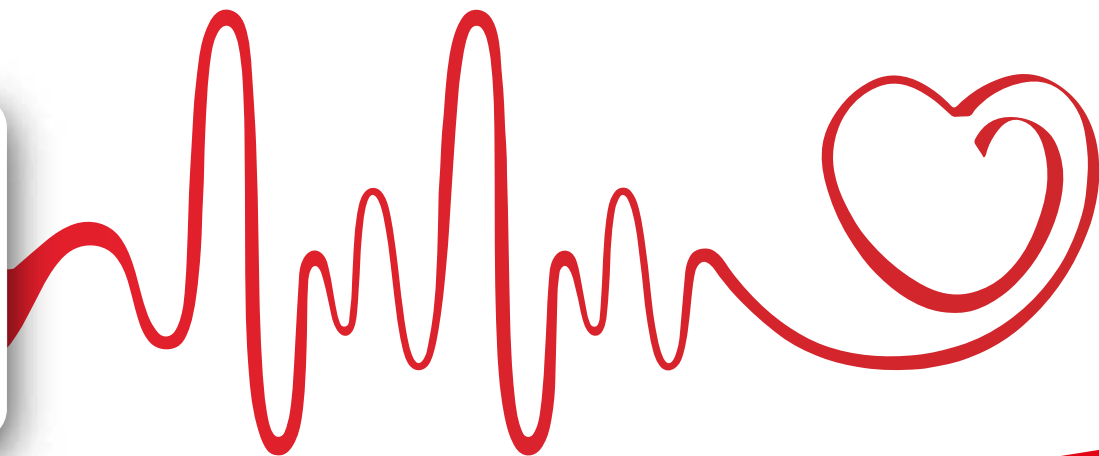

MOVILIDAD, POSTURA Y TRASLADO

mouse



SISTEMA POSTURAL MOUSE

● Sistema Postural MOUSE de tilt Basculante:

Está diseñado para los usuarios más jóvenes con una estatura de 65 a 110 cm y de 30 kg de peso máximo.

Su estructura robusta compuesta por un chasis y una butaca combinados con un fácil manejo lo convierte en un soporte perfecto para las actividades del día a día.

MOUSE dispone de una amplia gama de ajustes tanto del respaldo como del asiento y del reposapiés que permiten al niño obtener una posición óptima en la silla de paseo. También tiene la opción de colocar controles ajustables y un kit de ajuste del asiento (alcochados reductores) que hacen que viajar sea aún más seguro y cómodo para el pequeño usuario.

MOUSE dispone de una amplia gama de accesorios que facilitan el funcionamiento diario, independientemente de las condiciones meteorológicas.



● Como solicitar La silla de Ruedas MOUSE:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,10 m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Butaca reversible de postura con Reclinación a 180° y Sistema TILT Basculante de 0° a 30°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, cintas abductoras o bloque abductor, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos. Cuenta con Crash Test y certificación ISO-13485.





Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS

mouse



Capota con visor



Almohadillas
Reductoras



Controles



Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable



Amortiguación
y freno



Bloqueo
de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 24 / 32 cm
-  Profundidad asiento 22 / 26 cm
-  Altura asiento 52 cm
-  Altura apoyapies 14,4 / 23 cm
-  Peso del coche 17,2 / 23,2 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 95 / 124 cm
-  Alto del coche 122 / 134 cm
-  Ancho del coche 60 cm
-  Dimensiones plegado
Chasis L 84 x W 58 x H 25 cm
Asiento L 72 x W 42 x H 39

Mewa



SISTEMA POSTURAL MEWA

● Sistema Postural MEWA de tilt Basculante:

Está destinado a usuarios pequeños de 90 a 125 cm de estatura y de 40 kg de peso máximo.

Su estructura robusta que consta de un chasis y una butaca combinada con un manejo cómodo y fácil hace del mismo un soporte indispensable en la vida cotidiana tanto para el niño como para su asistente.

MEWA ofrece muchas opciones de configuración gracias a los sistemas de ajuste angular en la zona del respaldo, del asiento y del reposapiés. Una amplia gama de ajustes permite adaptar el cochecito a las necesidades individuales del niño. Además, la posibilidad de colocar controles ajustables y un kit de ajuste del asiento proporciona al joven pasajero la comodidad y la seguridad aún mayores durante el viaje.

MEWA dispone de una amplia gama de accesorios que facilitan el funcionamiento diario independientemente de las condiciones meteorológicas.



● Como solicitar La silla de Ruedas MEWA:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,25 m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Butaca reversible de postura con Reclinación a 180° y Sistema TILT Basculante de 0° a 30°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, cintas abductoras o bloque abductor, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos. Cuenta con Crash Test y certificación ISO-13485.





Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS

Mewa



Capota con visor



Almohadillas Reductoras



Controles



Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable



Amortiguación y freno



Bloqueo de giro

MEDIDAS

- Ancho asiento 25 / 32 cm
- Profundidad asiento 24 / 28 cm
- Altura asiento 62 cm
- Altura apoyapies 17 / 32 cm
- Peso del coche 20 / 28 kg
(con accesorios completo)
- Largo del coche 84 / 126 cm
- Alto del coche 124 / 129 cm
- Ancho del coche 65 cm
- Dimensiones plegado
Chasis L 84 x W 64 x H 26 cm
Asiento L 88 x W 43 x H 24



BASE MÓVIL IN.BASIC

Base Móvil IN.BASIC:

La **IN.BASIC** es una base móvil diseñada para utilizarse en interiores. Es compatible con los asientos de nuestras sillas: MOUSE y MEWA. Resulta ideal para ser utilizada en casa, en el colegio o en centros de rehabilitación.

Es posible ajustar la altura de la base móvil **IN.BASIC**, de manera que el niño puede jugar, aprender o comer bajo la supervisión de un adulto en cualquier situación. Dispone de frenos independientes en cada rueda para garantizar la estabilidad y la seguridad.

Los asientos montados en la base in.basic tienen las mismas funcionalidades que en las sillas, como la posibilidad de ajustar el ángulo del respaldo, la función de cuna, el ángulo del reposapiés, la posición de reclinado y la opción de instalar el asiento hacia delante o hacia atrás.

Como solicitar La base móvil IN.BASIC:

Base domiciliaria de uso interior y rehabilitación, para las butacas “MOUSE” y “MEWA” infantil hasta 1,25 m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacta y fácil de armado-desarmado.

Cuenta con la posibilidad de descender a los 53 cm y elevar hasta 71 cm, logrando así poder trabajar y facilitar en distintos ámbitos las alturas dependiendo del profesional; como así también, gracias a su chasis ultra compacto, utilizarlo en casas, con barreras arquitectónicas muy reducidas, como ascensores, puertas angostas, pasillos y demás; esto brinda a las familias un alivio en los traslados y continuar priorizando la postura correcta. Ruedas domiciliarias con freno por pedal. “IN.BASIC” permite continuar con la funcionalidad Tilt de la butaca, Reclinación y Elevación de apoya pies tal como se ejecuta en la silla. Peso del chasis 7kg, con tolerancia de uso hasta 45kg.



F U N C I O N A L I D A D

Altura ajustable

Desde 53 cm hasta 71 cm. Esto permite que el niño puede jugar, aprender o comer bajo la supervisión de un adulto en cualquier situación.



Sistema Compatible

Esta traba univiersal MYWAM, permite colocar las butacas de la silla MOUSE y MEWA sin problemas ni ajuste previo. Doble ajuste facil y pactico como la silla.

Funcionalidad

Permite mantener el sistema TILT, Reclinación total y Elevación de apoya pies; y la opción de instalar el asiento hacia delante o hacia atrás.



MEDIDAS

-  Altura asiento 53 - 71 cm
-  Peso de la base 7 kg.
-  Largo de la base 95 cm
-  Alto de la base 104 cm
-  Ancho de la base 58 cm
-  Dimensiones plegado

Chasis L 107 x W 57 x H 22 cm



Grizzly



SISTEMA POSTURAL GRIZZLY

⦿ Sistema Postural GRIZZLY de tilt Basculante:

Está diseñado para niños de 85 a 140 cm de estatura y de 45kg de peso máximo.

Su estructura extensa y robusta formada por el chasis y una butaca lo convierte en un dispositivo extremadamente duradero que facilita el funcionamiento diario tanto a los usuarios como a sus asistentes. GRIZZLY combina una amplia gama de ajustes con comodidad y con un manejo fácil.

GRIZZLY está equipado con el sistema “**Crezco contigo**” que permite ajustar los parámetros de la profundidad del asiento y la altura del respaldo. Junto con el reposapiés ajustable, los controles regulables, el asiento basculante y el respaldo reclinable, le ofrecemos un cochecito completo que brinda la comodidad, la seguridad y la funcionalidad para años.

GRIZZLY cuenta con una amplia gama de accesorios que facilitan las actividades diarias, independientemente de las condiciones meteorológicas.



⦿ Como solicitar La silla de Ruedas GRIZZLY:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,40m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 19 cm y Posteriores de 30cm., freno por pedal. Butaca reversible, con sistema CREZCO CONTIGO regulable y de postura con Reclinación a 180° y Sistema TILT Basculante de 0° a 45°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, cintas abductoras o bloque abductor, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos. Cuenta con Crash Test y certificación ISO-13485





Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS

Grizzly



Capota con visor



Controles



Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable



Amortiguación y freno



Bloqueo de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 18 / 40 cm
-  Profundidad asiento 25 / 37 cm
-  Altura asiento 57 / 70 cm
-  Altura apoyapies 23 / 40,5 cm
-  Peso del coche 20 / 28 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 97 / 115 cm
-  Alto del coche 108 / 123 cm
-  Ancho del coche 65 cm
-  Dimensiones plegado
Chasis L 80 x W 64 x H 35 cm
Asiento L 72 x W 43 x H 47

alfa



SISTEMA POSTURAL ALFA

Sistema Postural ALFA:

Está diseñado para niños de 100 a 150 cm de estatura y de 55kg de peso máximo.

Su amplia y sólida construcción, compuesta por estructura, asiento y respaldo independiente, lo hace extremadamente duradero y facilita significativamente tanto el embalaje como el transporte del dispositivo.

Gracias a la función **“Creczo contigo”**, Alfa te permite ampliar suavemente la profundidad del asiento (de 30 a 40 cm) y la altura del respaldo (de 59 a 74 cm). Combinado con la posibilidad de tilt e inclinación rápida del respaldo, reposapiés ajustable y almohadillas ajustables, obtenemos un producto integral que garantiza el máximo confort, seguridad y funcionalidad durante muchos años.

Por último, pero no menos importante, ALFA también cuenta con un diseño moderno, que lo hace aún más universal y atractivo.



Como solicitar La silla de Ruedas ALFA:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,50 m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Sistema de placas planas postural con Reclinación a 160° y Sistema TILT Basculante de 0° a 45°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Cintas abductoras o bloque abductor, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos. Cuenta con Crash Test y certificación ISO-13485.





alfa



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Cinturón de 5 ptos



Capota con visor



Apoya Cabeza



Barral




Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable

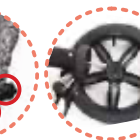

Amortiguación
y freno



Bloqueo
de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 28 / 43 cm
-  Profundidad asiento 31 / 45 cm
-  Altura asiento 65 / 85 cm
-  Altura apoyapies 28,5 / 43,5 cm
-  Peso del coche 24 / 28,6 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 114,5 / 146 cm
-  Alto del coche 117 / 138 cm
-  Ancho del coche 66 cm
-  Dimensiones plegado
L 110 x W 66 x H 50 cm

alfaflex



SISTEMA POSTURAL ALFA

Sistema Postural ALFA FLEX:

La silla postural que se adapta al usuario, no al revés.

La Alfa Flex incorpora sistemas de posicionamiento por vacío **STABILO**, permitiendo un moldeado preciso y personalizado del cuerpo para lograr mayor estabilidad, confort y control postural. Ideal para el uso diario, combina tecnología clínica avanzada con una estructura ágil y funcional para entornos urbanos.

Posicionamiento exacto. Confort superior. Libertad de movimiento.

Como solicitar La silla de Ruedas ALFA:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,50 m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Sistema de placas planas postural con conjunto de posicionamiento por medio de vacío que reduce la presión mediante el aumento de la base de sustanciación en contacto. Permite readaptar la forma tantas veces como sea necesario. Incluye bomba manual. Pico de inflado-desinflado mecánico, con garantía certificada, mantiene la textura deseada en el tiempo. Construido de neoprene cubierto con tela de nylon elástica. Totalmente Impermeables, repelen la humedad, certificadamente antibacteriano e ignífugos. NO contienen látex. Base Suave material de Velcro. Cuenta con Reclinación hasta 160° y Sistema TILT Basculante de 0° a 45°; controles de tronco, cadera, Pechera y Cinturón de seguridad 2 puntos individuales por pierna. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos. Cuenta con Crash Test y certificación ISO-13485





alfa flex



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Cinturón de 5 ptos



Capota con visor



Apoya Cabeza



Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable



Amortiguación y freno



Bloqueo de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 28 / 43 cm
-  Profundidad asiento 31 / 45 cm
-  Altura asiento 65 / 85 cm
-  Altura apoyapies 28,5 / 43,5 cm
-  Peso del coche 24 / 28,6 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 114,5 / 146 cm
-  Alto del coche 117 / 138 cm
-  Ancho del coche 66 cm
-  Dimensiones plegado
L 110 x W 66 x H 50 cm

The logo for YETI, featuring the word "YETI" in a stylized, bold font inside a speech bubble-like shape.

SILLA DE PASEO YETI

● Silla de paseo YETI con tilt Basculante:

Está diseñado para niños y jóvenes de 130 a 175 cm de estatura y de 80 kg de peso máximo.

Consta de un chasis plegable y del tapizado que forman una pieza. El tapizado dispone del sistema de tensión ajustable.

YETI ofrece una amplia gama de ajustes que permite ampliar el asiento y el respaldo, así como bajar el reposapiés. Con el fin de estabilizar a usuarios más pequeños es posible colocar almohadillas reductoras ajustables.

Adicionalmente, es posible regular el ángulo del respaldo, del asiento y del reposapiés. Gracias a eso, podemos adaptar fácilmente la posición del mismo a las necesidades individuales del usuario garantizándole la seguridad y el confort.



● Como solicitar La silla de Ruedas YETI:

Silla de Paseo y Postura infante adolescente hasta 1,75m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las ruedas traseras. Ruedas de gel Anteriores de 19 cm y Posteriores de 30 cm. freno por pedal. Con Reclinación de respaldo hasta 180° y Sistema TILT Basculante de 0° a 35°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, cintas abductoras o bloque abductor, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg., mesa didáctica y barra de seguridad incluidos.





Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS

YETI



Capota con visor



Apoya Cabeza



Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie regulable



Amortiguación
y freno





Bloqueo
de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 28 / 43 cm
-  Profundidad asiento 31 / 45 cm
-  Altura asiento 65 / 85 cm
-  Altura apoyapies 28,5 / 43,5 cm
-  Peso del coche 24 / 28 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 114,5 / 146 cm
-  Alto del coche 117 / 138 cm
-  Ancho del coche 66 cm
-  Dimensiones plegado
Chasis L 110 x W 66 x H 50 cm

ZEFIR

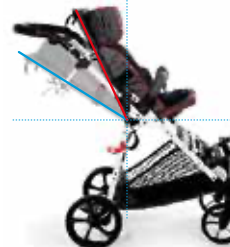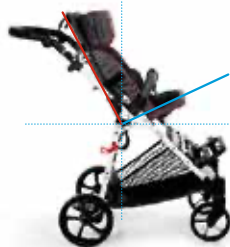

SILLA DE PASEO ZEFIR

● Silla de paseo ZEFIR:

Está pensado para niños de 80 a 130 cm de estatura y de 40 kg de peso máximo. Su estructura compacta, extremadamente ligera, permite la posibilidad y la amplia gama de accesorios complementarios, que convierten el choche en un soporte eficaz y práctico en el funcionamiento diario.

ZEFIR ofrece muchas funcionalidades útiles, como la inclinación del respaldo y el reposapiés de altura ajustable. También permite ampliar la altura del respaldo (añadiendo extensiones) y la profundidad y el ancho del asiento (desplegándolo).

ZEFIR dispone de una amplia gama de accesorios que facilitan el funcionamiento diario independientemente de las condiciones meteorológicas.

● Como solicitar La silla de Ruedas ZEFIR:

Silla de Paseo infantil de 80 a 1,40 m.; con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil armado-desarmado de plegado Fontal, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Respaldo reclinable en 2 puntos, Tilt fijo en 8°; Sistema CREZCO CONTIGO regulable y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Almohadillas laterales. Capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5 kg y Mesa didáctica.





ZEFIR



Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS




Capota con visor



Regulable
en profundidad



Apoya Cabeza

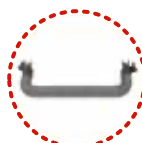

Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie
regulable



Amortiguación
y freno



Bloqueo
de giro

MEDIDAS

-  Ancho asiento 29 / 38 cm
-  Profundidad asiento 24 / 33 cm
-  Altura asiento 50 / 60 cm
-  Altura apoyapies 20 / 30 / 40 cm
-  Peso del coche 13 / 18 kg
(con accesorios completo)
-  Largo del coche 98 / 113 cm
-  Alto del coche 102 / 138 cm
-  Ancho del coche 62 cm
-  Dimensiones plegado
L 85 x W 60 x H 31 cm

VILA



SILLA DE PASEO VILA

• Silla de paseo VILA:

Está pensado para niños de 80 a 130 cm de estatura y de 40 kg de peso máximo. Su estructura compacta, y ligera, permite la posibilidad y la amplia gama de accesorios complementarios, que convierten el choche en un soporte eficaz y práctico en el funcionamiento diario.

VILA ofrece muchas funcionalidades útiles, como la reclinación del respaldo y el reposapiés de altura ajustable. También permite ampliar la altura del respaldo, la profundidad y el ancho del asiento (desplegándolo), cuenta con base rígida de aluminio, la que permite colocar todo tipo de accesorio postural o de sujeción.

VILA dispone de una amplia gama de accesorios que facilitan el funcionamiento diario



• Como solicitar La silla de Ruedas ZEFIR:

Silla de Paseo infantil de 80 a 1,40 m.; con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil armado-desarmado de plegado Frontal, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Respaldo reclinable en 2 puntos, Tilt fijo en 8°; Sistema CREZCO CONTIGO regulable y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Almohadillas laterales. Capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5 kg y Mesa didáctica.





VILA



Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

ACCESORIOS Y MEDIDAS




Capota con visor



Regulable
en profundidad



Apoya Cabeza

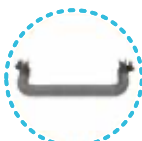

Barral



Bloque abductor



Mesa



Apoya pie
regulable



Amortiguación
y freno



Bloqueo
de giro

MEDIDAS

- Ancho asiento 29 / 38 cm
- Profundidad asiento 24 / 33 cm
- Altura asiento 50 / 60 cm
- Altura apoyapies 20 / 30 / 40 cm
- Peso del coche 18 kg
(con accesorios completo)
- Largo del coche 98 / 113 cm
- Alto del coche 102 / 138 cm
- Ancho del coche 62 cm
- Dimensiones plegado
L 85 x W 60 x H 31 cm

go.spider



ANDADOR GO.SPIDER



Andador Ortopédico GO.SPIDER:

El andador ortopédico go.spider se diseñó principalmente para el apoyo del aprendizaje en la marcha con la asistencia de un cuidador. Cuenta con 3 tallas 1- 100 y 135 cm / 2- 130 a 150 cm / 3- 150 a 170 cm.

Su diseño sencillo y sus pequeñas dimensiones lo convierten en un dispositivo versátil, apto tanto para uso doméstico como en el exterior. Plegado ocupa poco espacio, por lo que el almacenamiento o el transporte no son problemáticos.

El andador ortopédico go.spider tiene ruedas delanteras funcionales con el bloqueo direccional, lo que le da al usuario más control cuando se desplaza.

Las ruedas traseras del andador go.spider están equipadas con un ralentizador ajustable, que reduce la velocidad de desplazamiento a medida que se aprieta la presión.

También tiene protección contra el retroceso incontrolado, lo que tiene un impacto significativo en la seguridad durante el uso.

Como solicitar El Andador GO.SPIDER:

Andador infantil de 100 a 1,35 cm. regulable, con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado. Ruedas delanteras de giro libre y bloqueo de dirección que permiten controlar la trayectoria del usuario, Ruedas traseras con protección para retroceso y reductor de velocidad para el desplazamiento, permitiendo controlar el ritmo de marcha. Incluye chiripa y manijas ajustables. Medidas, Largo de 80cm, ancho 68cm, altura regulable de 51cm a 82cm. Peso del equipo 5,6 kg.



Accesorios NO incluidos, opcionales a pedido.

go.spider



ACCESORIOS Y MEDIDAS




BLOQUEO DE DIRECCIÓN DE LA RUEDA DELANTERA

Esta función permite al usuario controlar la trayectoria. Desactivar el bloqueo hace que las ruedas se sometan al control del usuario y respondan a la presión y la inclinación del cuerpo del niño. Es favorable en caso de una conducción dinámica, durante la diversión fuera de casa, en el parque o maniobrar por habitaciones pequeñas.

AJUSTE DE VELOCIDAD

A través de la perilla móvil, podemos aumentar la presión sobre la rueda, limitando así su velocidad. Eso será importante en caso de usuarios menos experimentados y niños que no pueden controlar su propio ritmo de conducción. Aflojar la presión significa una mayor libertad al ajustar la velocidad, así como la capacidad de realizar maniobras dinámicas.

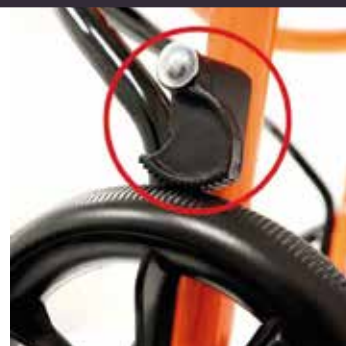

BLOQUEO DE RETROCESO

Al bajar el bloqueo sobre la rueda hace que, cuando el andador se mueve hacia atrás, el elemento de bloqueo resista y el vehículo se detenga. Esta solución es perfecta para caminar en terreno inclinado, en cuesta arriba o cuando el usuario da los primeros pasos y no tiene pleno control sobre la pista de conducción.

- Largo del andador 80 cm
- Ancho del andador 68 cm
- Altura del andador 51 - 82 cm
- Peso del andador 5,6 kg
- Dimensiones plegado
L 80 x W 68 x H 28 cm



delfi



REPOSERA DE BAÑO

● Reposera de Baño DELFI:

La silla de baño DELFI está diseñada para pacientes de 30, 50 y 70 kg de peso. Su tarea básica es permitir que el tutor realice actividades de baño e higiene libremente en el usuario colocado en él, con la protección adecuada y en una posición óptima para él.

La silla de baño DELFI está diseñada para su uso en la bañera o la ducha.

Una serie de protecciones necesarias, como un reposacabezas estabilizador ajustable, un cinturón estabilizador del torso y cinturones estabilizadores de piernas, afectan significativamente la seguridad del usuario durante el baño. Los soportes de la silla de baño están envueltos en espuma, lo que garantiza la adhesión y protege la superficie de los arañazos.

● Como solicitar reposera de baño DELFI:

Silla Reposera de Baño es una solución modular y ajustable, diseñada para ofrecer confort y seguridad. Cuenta con un chasis de aluminio ligero y duradero, y una malla de contacto de alta resistencia que permite un secado rápido. Su asiento y respaldo ajustables permiten personalizar la posición según la necesidad del usuario, y su reposacabezas es desmontable y adaptable. Incluye cinturones de seguridad pélvicos y de tronco, y su altura es regulable para distintas posiciones de uso. Con una capacidad máxima de 30, 50 y 70 kg, es ideal para usuarios que buscan funcionalidad y comodidad en el baño.





delfi



ACCESORIOS Y MEDIDAS



APOYA CABEZA REGULABLE

A través de un simple boton



RESPALDO RECLINABLE

Hasta de 85° a 166°



APOYA PIES REGULABLE

A través de un simple boton



CONTROLES DE APOYA CABEZA

El apoya cabezas ajustable protege y estabiliza la cabeza del niño durante el baño, evitando que se caiga de forma incontrolable.



STRAP DE CADERA

El cinturón estabilizador del torso elástico estabiliza al usuario durante el baño, evitando que el niño se deslice de la silla de baño.



SUJECION DE PIERNAS

Dos correas de estabilización de piernas individuales le permiten proteger e inmovilizar las piernas del usuario durante las actividades higiénicas.

MEDIDAS

-  Ancho asiento 38 / 42 cm
-  Profundidad asiento 40 cm
-  Altura respaldo 60,5 / 68,5 cm
-  Altura apoyapies 38 cm
-  Peso de la reposera 4,9 kg
-  Reclinacion de respaldo 166°
-  Largo de reposera 137 / 149 cm
-  Ancho de reposera 117 / 138 cm



SILLA POSTURAL DE MADERA

• Silla para postura IG:

Comodidad y Apoyo Terapéutico en cada momento, la silla de madera es la solución perfecta para rehabilitación, aprendizaje y más. Ofrece un ajuste sencillo para garantizar una postura saludable y cómoda.

Respaldo Reclinable, se ajusta fácilmente para mayor comodidad. Apoya Pies con sujeción para los pies de forma segura. Control de Tronco para proporcionar estabilidad lateral. Bloque Abductor. Cinturón y Pechera para seguridad total para el usuario.

Ideal para cualquier actividad, la silla IG combina funcionalidad y confort para una experiencia única. ¡Transforma tu día con el mejor apoyo postural!

• Como solicitar la silla IG postural de madera:

Silla de madera compacta de eucalipto, con tapicería impermeable y acolchada. Ideal para terapia física, ocupacional, y entornos educativos, ofreciendo confort y seguridad en un diseño compacto. Sistema tilt regulable. Reclinación de respaldo 90° a 115°. Con controles de tronco regulables en altura y profundidad. Apoya brazos acolchados.

Accesorios opcionales: Bloque abductor, mesa, base rodante, apoya cabezas, pechera mariposa y cinturón 2 puntos





IG
SILLAS POSTURALES

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Modulo "S" 90 cm a 100 cm

-  Ancho de asiento 23 cm
-  Profundidad 18 cm a 23 cm
-  Altura respaldo 26 cm
-  Reclinacion 90 a 115
-  Altura del asiento al suelo
19,5 cm a 26 cm (Regulable)

ACCESORIOS

Pechera mariposa
Cinturon de 2 puntos
Controles de Tronco - Cadera
Mesa - Bloque Abductro
Base rodante

Modulo "M" 90 cm a 115 cm

-  Ancho de asiento 31 cm
-  Profundidad 22 cm a 30 cm
-  Altura respaldo 31 cm
-  Reclinacion 90 cm a 115 cm
-  Altura del asiento al suelo
24 cm a 31,5 cm (Regulable)

Modulo "L" 100 cm a 130 cm

-  Ancho de asiento 31 cm
-  Profundidad 24,5cm a 34,5cm
-  Altura respaldo 35 cm
-  Reclinacion 90 cm a 115 cm
-  Altura del asiento al suelo
27,5 cm a 36,5 cm (Regulable)



STABILO System

La solución definitiva para quienes buscan un apoyo personalizado y eficaz. Este avanzado sistema de estabilización de almohadones y colchones utiliza tecnología de vacío para adaptarse perfectamente a tu cuerpo. Con una bomba especial, puedes ajustar la firmeza y la forma del almohadón de manera rápida y sencilla, asegurando el soporte ideal en todo momento.

Diseñado para ofrecer un ajuste preciso, Stabilo ayuda a corregir distorsiones del tronco y mitigar deficiencias, brindando una estabilidad excepcional para el tronco, las extremidades y la cabeza. Su versatilidad es insuperable, con una amplia gama de modelos que se adaptan a diversas necesidades, permitiéndote lograr una postura corporal correcta con facilidad.

La calidad de los materiales y la tecnología de producción avanzada garantizan una durabilidad y un rendimiento excepcionales. Fabricado en Cracovia con un sistema de gestión dedicado, Stabilo es sinónimo de confianza y excelencia en cada almohadón.

¡Experimenta la diferencia con Stabilo y disfruta de un soporte a medida que transforma tu bienestar!




Asiento Estabilizador Pélvico



• **El Almohadón “BASE”**, es un asiento estabilizador y descontracturante, diseñado para personas con deformidades pélvicas y asimetría de cadera. La almohada es fácil de formar y darle la forma deseada, según tus necesidades. La forma se puede cambiar muchas veces.

• **El Almohadón “BASE HILO”**, es un asiento estabilizador con una cuña prominente que abduce las piernas. Es una extensión del asiento Base. La almohada estabiliza al usuario en una posición sentada. Al colocar las extremidades inferiores en una posición neutra, la cuña abductora protege contra la contractura de los abductores.

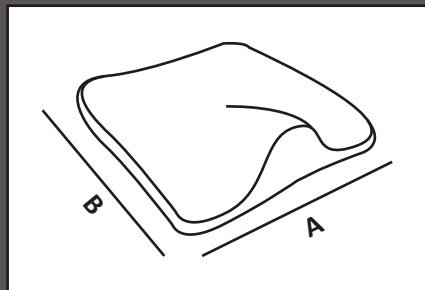

TALLES	A	B
S	25cm.	38cm.
S+	35cm.	32cm.
M	40cm.	40cm.
M+	45cm.	45cm.
L	50cm.	50cm.





Estabilizador Pélvico con Controles


El Almohadón "DORO"

Almohadón para posicionamiento dinámico mediante vacío, anti escaras. Con bloque abductor incluido y aletas laterales para control pélvico.

Crea la hondonada pélvica, mejorando el posicionamiento de la pelvis en retroversión, ante-versión, oblicuidad y rotación. Controla abducción - aducción de las piernas, adaptable a formas asimétricas y necesidades especiales.

Ayuda y mejora a la estabilidad del tronco, gracias a sus aletas laterales.

Reduce la presión mediante el aumento de la base de sustanciación en contacto. Permite readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

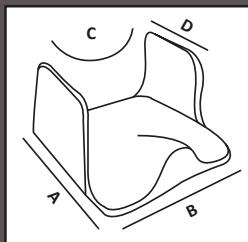

TALLES	A	B	C	D
S	25cm.	30cm.	64cm.	14cm.
S+	35cm.	35cm.	73cm.	18cm.
M	40cm.	40cm.	90cm.	20cm.
M+	45cm.	45cm.	101cm.	29cm.






Respaldo Estabilizador con Controles

➤ **Respaldo corsé “CONFORTABLE”**, es una almohada estabilizadora de la espalda con controles laterales adicionales proporciona un apoyo cómodo, lo que también brinda la oportunidad de corregir defectos de postura y mejorar el control del cuerpo. Los soportes laterales anchos y un gran reposacabezas de la almohada estabilizan al paciente y también ayudan en la protección de la sección cervical y asegurar el correcto posicionamiento de la cabeza.

➤ **Respaldo corsé “CONFORTABLE PLUS”**, respaldo con controles y soporte de apoya cabezas. Permite la estabilización de las caderas y brinda a los usuarios una posición cómoda con la posibilidad de corregir las curvaturas de la columna, lo que permite un mejor control de la postura.

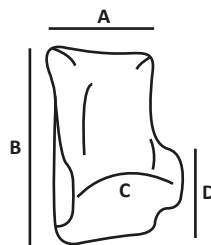

TALLES	A	B	C	D
S	30cm.	50cm.	58cm.	28cm.
M	35cm.	60cm.	65cm.	28cm.
L	40cm.	75cm.	75cm.	35cm.
XL	45cm.	75cm.	85cm.	35cm.




Asiento y Respaldo Estabilizador



● **Asiento Respaldo “CONFORTABLE PLUS DUO”**, es un conjunto de soportes laterales y un reposacabezas combina las funciones de un respaldo y un asiento. Permite la estabilización de las caderas y brinda a los usuarios una posición cómoda con la posibilidad de corregir las curvaturas de la columna, lo que permite un mejor control de la postura.

● **Asiento Respaldo “CONFORTABLE PLUS DUO HILO”**, cuenta con una cuña prominente aumenta la estabilización de las caderas y brinda a los pacientes un apoyo cómodo. Permite la corrección de las curvaturas de la columna, lo que permite un mejor control de la postura. Una cuña de abducción especial reduce las contracturas de los aductores al colocar las extremidades inferiores en una posición neutral.

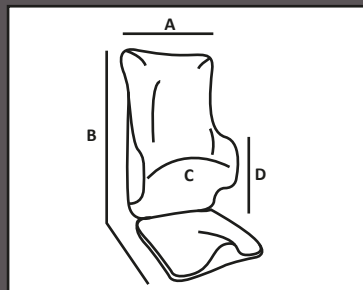

TALLES	A	B	C	D
S	30cm.	80cm.	58cm.	28cm.
M	39cm.	95cm.	65cm.	28cm.
L	40cm.	115cm.	75cm.	35cm.
XL	45cm.	120cm.	85cm.	35cm.






Butaca MULTISEAT

Butaca MULTI SEAT

Butaca para coche, asiento ortopédico, columpio y mucho mas.
Cuenta con Homologacion "ECE R44/04".

El Multiseat es asiento ortopédico integral: un asiento que estabiliza la pelvis, el tronco y la cabeza. Consta de tres cojines del sistema Stabila Multiseat unidos a un marco de aluminio.

Es perfecto como asiento de coche seguro para el transporte de personas con necesidades posturales, como columpio para la relajación, por ejemplo, en el parque infantil, y rehabilitación, y como asiento ortopédico independiente que se puede acoplar fácilmente a un sillón o silla.

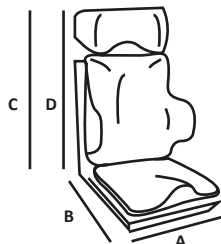

TALLES	A	B	C	D
M	38cm.	35cm.	53 - 62 cm.	49 - 58 cm.
L	42cm.	40cm.	73 - 82 cm.	69 - 78 cm.




Colchón Puf BEANSEAT



● Puf “BEANSEAT”

Almohadón especial en forma de Puf. Permite colocar al paciente en posición sentada y semi tumbada, teniendo en cuenta la necesidad de estabilizar todo el cuerpo. Al distribuir el peso corporal sobre una gran superficie de contacto, reduce el riesgo de úlceras por presión y, además, brinda la oportunidad de envolver al paciente. La forma fácil de modelar permite que el usuario se coloque en la posición correcta durante la terapia, por ejemplo, cuando trabaja con un terapeuta del habla, lo que facilita que el paciente participe en las clases. La almohada también es un elemento importante para consolidar los efectos de la rehabilitación fisioterapéutica al colocar al usuario en la posición correcta deseada.

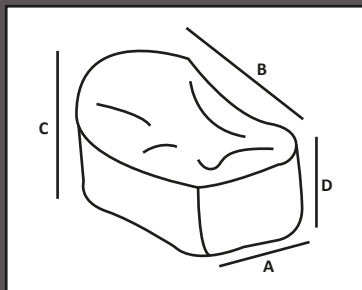

TALLES	A	B	C	D
M	60cm.	80cm.	50cm.	40cm.
L	70cm.	100cm.	70cm.	50cm.





Apoya Cabeza - Apoya Pies - Apoya Brazos



- Reposacabezas con función de fácil modelado y ajuste a las necesidades del paciente. Apto para montar en la mayoría de sillas de ruedas y asientos de rehabilitación.
- El cojín corrector de vacío, tipo reposapiés, forma parte del sistema de guarniciones terapéuticas. Es un complemento perfecto para la rehabilitación diaria. Se adapta a los pies, estabilizándolos en la posición adecuada.
- El reposabrazos con función de fácil modelado y ajuste se utiliza en sillas de ruedas y asientos de rehabilitación. Permite la estabilización y el ángulo óptimo del antebrazo en posición sentada y tumbada.



Collar BATH BAGEL




Collar "BATH BAGEL"

Es un producto diseñado para niños y adultos, cuya tarea es ayudar durante el baño. Brinda un excelente soporte para la cabeza, manteniéndola por encima de la superficie del agua y evitando que se sumerja.

La almohada es cómoda y segura de usar, gracias al uso de un sistema especial de correas de sujeción, luego la fuerza de flotación actúa sobre el pecho, y no directamente sobre el cuello y la cabeza, aliviando los músculos del cuello y asegurando así una correcta estabilización, relajación y seguridad durante el baño.

Tiene una función terapéutica para personas con enfermedades neurológicas con aumento o disminución de la tensión o enfermedades articulares, mejorando la capacidad de mover libremente las extremidades y el torso en el agua y permitiéndose realizar ejercicios de alivio. Al mismo tiempo, evita los movimientos de torsión en el agua, lo que garantiza la seguridad durante la terapia.

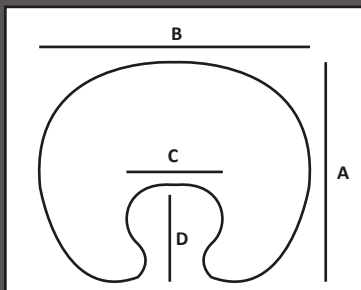

TALLES	A	B	C	D
S	30cm.	35cm.	10cm.	12cm.
M	35cm.	37cm.	12cm.	17cm.
M+	45cm.	55cm.	12cm.	17cm.
L	45cm.	60cm.	17cm.	22cm.





Colchón de Posicionamiento


Colchon de Posicionamiento “GRANDE”

Colchón modelable para posicionamiento dinámico apto para rehabilitación y descanso, anti escaras, modelable mediante sistema de vacío, ideal para pacientes en acostado o sentado.

Reduce la presión mediante el aumento de la base de sustanciación en contacto, buscando la correcta posición en descanso de cabeza, tronco, pelvis y miembros superiores e inferiores.

Permite readaptar la forma tantas veces como sea necesario.

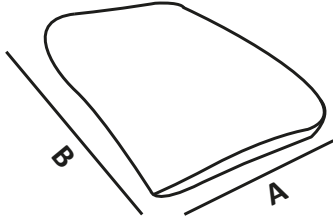

	TALLES	A	B
	M	70cm.	160cm.
	M+	90cm.	200cm.
	L	130cm.	200cm.

voyageur



Arnés Posicionamiento



• Arnés para vehículos de transporte “VOYAGEUR”

La Revolución en Sistemas de Cinturones para Estabilización y Posicionamiento Voyageur es una solución innovadora que ofrece soporte y confort excepcionales para aplicaciones médicas, terapéuticas o cotidianas.

Diseñado para proporcionar estabilidad y seguridad en cada momento, este sistema es la elección ideal para quienes necesitan un soporte postural superior.

Previene caídas y movimientos no deseados, ofreciendo accesibilidad y efectividad sin precedentes. Mejora la alineación corporal, permitiendo disfrutar de una vida más cómoda y saludable. Otorgando Seguridad, Estilo y Comodidad en Cada Movimiento.

• Características de Voyageur:

Cinturones Seat-Grid™: Actúan como una base firme y combinados con el X-Posture-Suit™, garantizan un posicionamiento preciso y estabilidad incomparable. Este componente se adapta a cada usuario para una experiencia de uso excepcional.

X-Posture-Suit™: Asegura el torso y facilita la corrección postural, abduce los muslos y asegura la pelvis, evitando movimientos indeseados hacia adelante o hacia los lados. Su diseño avanzado mejora la alineación corporal.

Materiales Suaves y Elásticos: Proporcionan una estabilización excepcional y un confort incomparable. Voyageur es sinónimo de comodidad, conveniencia y facilidad de uso, adaptándose con precisión a las necesidades de cada usuario.



BEROLLKA
bewegt



**MADE IN
GERMANY**

Kayou



SILLA KAYOU

● Silla de autopropulsión pediátrica KAYOU:

Diseñada especialmente para satisfacer las necesidades únicas de los más pequeños.

Entendemos que los bebés merecen la oportunidad de explorar su entorno con mayor movilidad y actividad, ya que los primeros años de vida son fundamentales para su desarrollo terapéutico y su crecimiento futuro.

KAYOU no es solo una silla de ruedas, es un equipamiento excepcional que combina calidad y versatilidad, facilitando la adaptación a cada pequeño usuario. Su diseño innovador y sus características personalizables garantizan comodidad y apoyo, permitiendo que los bebés disfruten de su infancia al máximo.

Con KAYOU, estamos construyendo el camino hacia un futuro lleno de posibilidades para nuestros niños.

● Como solicitar la silla de autopropulsión pediátrica KAYOU:

Silla de ruedas pediátrica ultraliviana de autopropulsión diseñada para niños en crecimiento. Con un cuadro rígido de aluminio 7020 tubular y paneles de guardabarros ajustables de aluminio o fibra de carbono. Es completamente ajustable en ancho, profundidad, altura y ángulo, asegurando un ajuste perfecto a medida que el niño crece. Pesa solo 4.8 kg pero soporta hasta 50 kg. Su centro de gravedad es regulable en altura y profundidad, y cuenta con una pedana única de aluminio ajustable. Las ruedas delanteras de 4"x1,5" permiten un rodado suave, mientras que las traseras neumáticas de 20"/22"/24" están disponibles con rayos de acero, fibra de carbono con un sistema de quíte rápido. El camber es ajustable a 7°-9°-11°-8°, ofreciendo una maniobrabilidad óptima. La silla incluye aros de empuje de aluminio, ruedas antivuelco extraíbles y frenos accesibles desde los apoyabrazos. Compatible con cualquier accesorio del mercado, cumple con las Normas ISO 7176-19 de crash test, garantizando seguridad y funcionalidad.





Kayou



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Sistema de asientos
KAYOU



Protector lateral con
freno integrado



Camber adaptador de
rueda trasera para
7°/9°/11°



MEDIDAS

- ① Ancho asiento 18 a 32 cm
 - ② Profundidad asiento 18 a 32 cm
 - ③ Altura respaldo 15 a 35 cm
 - ④ Reclin. respaldo 85° a 110°
 - ⑤ Peso del equipo 4,8 kg
 - ⑥ Peso max usuario 50 kg
- Rodado 20'' - 22'' - 24''
- Camber Opcional 7° - 9° - 11°



CRASH ISO 7176-19
TESTED

Findus



SILLA FINDUS



● Silla de autopropulsión pediátrica FINDUS:

Diseñada especialmente para niños y jóvenes, que ofrece una versatilidad excepcional en su uso.

Con su innovador marco rígido y en crecimiento, FINDUS proporciona una dinámica y movilidad extraordinarias en cualquier situación, adaptándose perfectamente a las necesidades de cada usuario.

Su ligero diseño y excelente agilidad hacen que la FINDUS sea ideal para el día a día, permitiendo un manejo sencillo y cómodo. Tras años de investigación y desarrollo, esta silla ha sido creada para satisfacer las necesidades de niños, padres y terapeutas, garantizando comodidad, seguridad y funcionalidad en cada aventura.

Con la FINDUS, cada día es una oportunidad para explorar y disfrutar de la vida al máximo.

● Como solicitar la silla de autopropulsión FINDUS:

Silla de ruedas pediátrica ultraliviana de autopropulsión diseñada para niños y jóvenes. Con un cuadro rígido de aluminio 7020 tubular y paneles de guardabarros ajustables de aluminio o fibra de carbono. Es completamente ajustable en ancho, profundidad, altura y ángulo, asegurando un ajuste perfecto a medida que el niño crece. Pesa 9kg y soporta hasta 120 kg. Su centro de gravedad es regulable en altura y profundidad, y cuenta con una pedana única de aluminio ajustable. Las ruedas delanteras de 4"x1,5" con ajuste continuo y las traseras neumáticas de 20"/22"/24" están disponibles con rayos de acero, fibra de carbono con un sistema de quite rápido. El camber es ajustable a 0°- 3°- 5°- 7°- 10°, ofreciendo una maniobrabilidad óptima. La silla incluye aros de empuje de aluminio, ruedas antivuelco extraíbles y frenos accesibles desde los apoyabrazos. Compatible con cualquier accesorio del mercado, cumple con las Normas ISO 7176-19 de crash test, garantizando seguridad y funcionalidad.

Finclus



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Camber reg. anteroposterior y altura



Apoyapie adaptable segun angulo y altura



Caster regulable de forma continua



MEDIDAS

- 📏 Ancho asiento 20 a 46 cm
 - 📏 Profundidad asiento 20 a 48 cm
 - 📏 Altura respaldo 20 a 40 cm
 - 📏 Reclin. respaldo
 - ⚖️ Peso del equipo 9 kg
 - ⚖️ Peso max usuario 120 kg
- Rodado 20" - 22" - 24"
- Camber Opcional 0° - 3° - 5° - 7° - 10°



CRASH ISO 7176-19
TESTED

Ryder

SLT/AR



SILLA RYDER "SLT/AR"

● Silla de autopropulsión RYDER:

El diseño innovador que ha conquistado a todos por su estilo moderno y manejo excepcional.

Su marco plegable y rígido garantiza un control preciso y una conducción ágil, permitiendo giros sin esfuerzo y una respuesta rápida como nunca antes.

Perfecto para niños, adolescentes y adultos llenos de energía, el RYDER está diseñado para acompañar todas sus actividades diarias y ofrecer una libertad de movimiento sin límites.

Con su manejo intuitivo y su estructura ligera pero resistente, los desafíos cotidianos se vuelven sencillos, y las escapadas al aire libre se transforman en emocionantes aventuras.

¡Con el RYDER, cada día está lleno de posibilidades y nuevas experiencias!

● Como solicitar la silla de autopropulsión RYDER:

Silla de ruedas súper ligera fabricada en aluminio 7020, ideal para uso interior y exterior. Cuenta con un sistema de cierre a doble cruceta que permite ajustar la altura y profundidad para mayor comodidad. Cumple con las normas de seguridad ISO 7176-19. Su asiento plegable en tijera, con sistema catalítico de calce, ofrece rigidez superior y evita el movimiento lateral, convirtiendo la silla en un chasis semi rígido. Los reposapiés son giratorios, ajustables, y fáciles de extraer. Las ruedas delanteras de 4", 5", o 6" proporcionan un rodado suave, complementado por un caster de regulación continua. Las ruedas traseras neumáticas, disponibles en 22", 24", o 25", tienen rayos de acero o fibra de carbono y aros de empuje anodizados para una conducción fluida. El eje posterior (CAMBER) permite ajustes en altura y profundidad, optimizando el posicionamiento y desempeño del usuario. Ofrece ángulos de asiento de 84°, 90° y 96°, soporta hasta 120 kg, y tiene un peso de transporte de 6 kg.





Ryder

SLT/AR



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Camber reg. anteroposterior y altura



Apoyapie adaptable según ángulo y altura



Caster regulable de forma continua



MEDIDAS

- 📏 Ancho asiento 28 a 50 cm
 - 📏 Profundidad asiento 32 a 50 cm
 - 📏 Altura respaldo 25 a 45 cm
 - 📏 Reclin. respaldo opcional
 - ⚖️ Peso del equipo 6 kg
 - ⚖️ Peso max usuario 120 kg
- Rodado 20" - 22" - 24"



CRASH ISO 7176-19
TESTED

Yuki



SILLA YUKI



☉ Silla para postura y autopropulsión pediátrica YUKI:

Diseñado para permitir una movilidad activa, ofrece la mayor libertad de movimiento para que tu hijo explore el mundo a su manera.

Desde una posición sentada activa hasta un descanso relajado, YUKI se adapta con facilidad a cada momento del día.

Su asiento con sistema TILT y respaldo Reclinable garantizan un confort inigualable. Con un estilo moderno y detallado, YUKI es más que un simple dispositivo; es un complemento esencial para la vida cotidiana. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para simplificar y enriquecer la vida diaria de tu hijo.

Ofrece una gama de accesorios opcionales, como reposacabezas, reposabrazos y una mesa de terapia. Personaliza YUKI para satisfacer las necesidades específicas de tu pequeño aventurero.

☉ Como solicitar la silla postural y de autopropulsión YUKI:

Silla de ruedas pediátrica ultra liviana de autopropulsión con un diseño modular que ofrece máxima flexibilidad y comodidad. Fabricada en aluminio 7020, cuadro súper rígido con plegado frontal y estructura abierta en la parte delantera para un mejor posicionamiento mmii en abducción. Sistema de basculación de -5° a 45° y reclinación del respaldo hasta 130° para una óptima adaptabilidad del usuario. Soporta hasta 75 kg, cumpliendo con los estándares de seguridad ISO 7176-19. Base del asiento de aluminio plana, con opciones de camber en ruedas posteriores. El respaldo es regulable en inclinación y puede ser rebatido, mientras que los apoyabrazos planos son ajustables en altura. Incluye antivuelcos rebatibles y ruedas traseras neumáticas de alta presión súper livianas, con aros de autopropulsión en aluminio anodizado con ejes de extracción rápida, además de ruedas delanteras sólidas. La manija de empuje es extraíble, y el apoyapiés es entero, ajustable en altura e inclinación. Los frenos operan a baja presión, proporcionando seguridad adicional.



Yuki



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Apoya cabeza regulable



Apoya Brazos rebatibles



Apoya pies único y ajustable



MEDIDAS

- 👤 Ancho asiento 26 a 40 cm
- 📏 Profundidad asiento 26 a 40 cm
- 📏 Altura respaldo 20 a 40 cm
- 📏 Reclin. respaldo 80° a 130°
- 🏋️ Peso del equipo 10 kg
- 🏋️ Peso max usuario 75 kg
- 📏 Tilt -5° a 45°

Rodado 22" - 24"

Camber Opcional 4° - 7° - 9° - 11°



CRASH ISO 7176-19
TESTED

B2



SILLA POSTURAL "B2"



● Silla para postura B2 System:

Diseñada para satisfacer las necesidades de pacientes que requieren soporte postural, este sistema mejora significativamente la calidad de vida mediante un diseño ergonómico y versátil.

Ideal para su uso tanto en interiores como exteriores.

Permite diversas opciones de ajuste, el sistema permite configuraciones individuales con accesorios posturales específicos, asegurando un soporte ergonómico óptimo para cada paciente, mejorando la postura y reduciendo el riesgo de complicaciones posturales.

El B2System es una solución integral para mejorar la movilidad y el soporte postural, adaptándose a las necesidades clínicas específicas de cada paciente.

◎ Como solicitar la silla postural B2 System:

Silla de ruedas con plegado frontal, diseñada con estructura tubular de aluminio para mayor ligereza y durabilidad. Fabricada en aluminio 7020, cumple con los estándares de seguridad ISO 7176-19 Compatible con diversos sistemas de posicionamiento en asiento y respaldo, se adapta perfectamente a la base. Disponible en anchos de cuadro desde 32 cm hasta 44 cm. Ofrece un tilt ajustable de -5° a 45° y inclinación de 90° a 120°, permitiendo acompañar el crecimiento del usuario con extensiones de hasta 10 cm de profundidad y 5 cm de ancho de asiento. Los apoyabrazos tipo escritorio son ajustables en altura y rebatibles para mayor comodidad. Equipada con ruedas traseras de 12" y delanteras de 6"x1.5", todas anti pinchaduras y de rodado suave. Incluye frenos de manija con bloqueo de las ruedas traseras y ruedas antivuelco con barra asistente. La pedana es rebatible, y ajustable. Manija de empuje única y regulable en altura para facilitar el manejo. Soporta hasta 120 kg de peso del usuario, con un peso total de la silla de 11 kg.



B2



ACCESORIOS Y MEDIDAS



Reclinacion de respaldo manual



Apoya pie regulable en inclinacion y altura



Chasis plegable compacto y ruedas extraíbles



MEDIDAS

- 🛖 Ancho asiento 32 a 44 cm
 - 🛖 Profundidad asiento regulable
 - 🛖 Altura respaldo regulable
 - 🛖 Reclin. respaldo 90° a 120°
 - 🛖 Peso del equipo 12 kg
 - 🛖 Tilt -5° a 45°
 - 🛖 Peso max usuario 90 a 120 kg
- Rodado 12'' - 16''



CRASH ISO 7176-15
TESTED

COBRA SPORT



SILLA COBRA SPORT

● Silla de autopropulsión COBRA SPORT:

Descubre la fusión perfecta de ligereza y eficiencia. Su innovador diseño ultraligero permite una experiencia de conducción dinámica y un manejo excepcionalmente sencillo.

Con un estilo deportivo y elegante, la COBRA SPORT se presenta como una opción moderna, diseñada para adaptarse a tu ritmo de vida. Su peso reducido no solo facilita su maniobrabilidad, sino que también incorpora un marco configurable, ajustándose a tus necesidades posturales para brindarte el máximo confort.

Considerada tu mejor compañera, la COBRA SPORT asegura no solo comodidad, sino también un verdadero placer al conducir. Además, su ágil sistema de plegado la convierte en el aliado ideal para tus traslados, permitiéndote disfrutar de una vida cotidiana activa y sin complicaciones.

● Como solicitar la silla de autopropulsión compacta COBRA SPORT:

Silla de ruedas autopropulsada ultraliviana y segura, diseñada con un estilo simple y elegante. Fabricada en aluminio 7020, destaca por su durabilidad y ligereza, pesando solo 4.8 kg y soportando hasta 120 kg. Cumple con las Normas ISO 7176-19 para máxima seguridad. Ofrece un centro de gravedad ajustable en altura y profundidad, ideal para adaptarse a distintas necesidades. El camber es personalizable a 0°-3°-5°, permitiendo ajustes precisos para una mayor estabilidad. Las ruedas traseras neumáticas, disponibles en 22", 24", o 25", son de rayos de acero o fibra de carbono, y aros de empuje anodizados para una conducción suave. Las ruedas delanteras de 4", 5" o 6" aseguran un rodado excepcionalmente suave, complementado por un caster de regulación continua. Además, incluye protectores de ropa extraíbles, ruedas antivuelco opcionales, y es compatible con cualquier accesorio del mercado. El respaldo, que se pliega frontalmente y es reclinable de 85° a 110°, junto con una base de asiento con tensores regulables, ofrece un confort superior y adaptabilidad.





COBRA SPORT

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Caster regulable de
forma continua



Respaldo reclinable en 7
puntos



MEDIDAS

- 📏 Ancho asiento 32 a 46 cm
- 📏 Profundidad asiento 36 a 46 cm
- 📏 Altura respaldo 25 a 45 cm
- 📏 Reclin. respaldo 7 puntos
- ⚖️ Peso del equipo 4,8 kg
- ⚖️ Peso max usuario 120 kg

Rodado 22" - 24" - 25"

Camber Opcional 0° - 3° - 5°



CRASH ISO 7176-19
TESTED

innuovo
Sport Wheelchair

AUTOPROPULSIÓN CARBONO

● INNUOVO, Silla de uso diario 100% CARBONO:

Innuovo fue diseñada para quienes buscan una silla realmente liviana, sin resignar estabilidad ni posibilidades de ajuste.

Su estructura en fibra de carbono y componentes en titanio permite reducir el peso al mínimo, mejorando la eficiencia en cada desplazamiento y facilitando el manejo diario.

Las regulaciones finas en asiento, respaldo y eje permiten adaptar la silla a cada usuario, optimizando postura, confort y rendimiento en el uso cotidiano.

El resultado es una silla ágil, reactiva y precisa, pensada para acompañar una vida activa, con materiales de alta gama y una construcción que prioriza durabilidad y desempeño. Menos peso. Más control. Más libertad de movimiento.

● Como solicitar INNUOVO:

Silla de ruedas manual construida íntegramente en fibra de carbono, con chasis minimalista y respaldo regulable en 4 puntos de ajuste en profundidad, soporte posterior ajustable y tapizado en tela transpirable.

Cuenta con ruedas delanteras de horquilla fija de 3" regulable y un camber único integrado al cuadro con eje de 1/2", acompañado de ruedas traseras de 24" de doble pared con cubiertas Marathon Plus.

Incluye una placa de asiento integral regulable en profundidad, confeccionada en fibra de carbono, con un almohadón básico, y apoya pies de titanio, regulable y súper ligero.





innuovo
Sport Wheelchair

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Plegado super compacto



Frenos escondidos



Antivuelco regulable y rebatible



Apoya pie de Titanio, regulable en altura



Guarda ropas extrahibles de Carbono



Respaldo regulable en profundidad


Parametros de Usuario

-  Ancho cadera 39/41 cm
-  Profundidad asiento 40 - 42 cm
-  Alto respaldo 30 cm
-  Peso max usuario hasta 130 kg

Campus Relax



BIPEDESTADOR CAMPUS

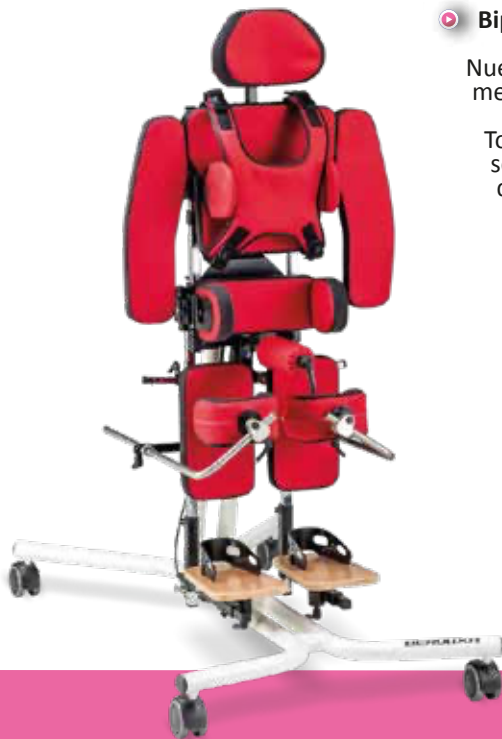

● Bipedestador CAMPUS RELAX:

Nuestro sistema de bipedestación está diseñado para ofrecer experiencias terapéuticas completamente nuevas.

Todas las almohadillas, accesorios y los reposapiés, son ajustables proporcionan comodidad y seguridad al permitir una postura óptima y adaptarse perfectamente a las necesidades individuales de cada niño.

Gracias al resorte de gas, el sistema permite un ajuste suave desde la posición de pie hasta una posición reclinada, brindando flexibilidad para que cada paciente explore su entorno de manera segura. Además, las múltiples opciones de ajuste y una amplia gama de accesorios aseguran que cada sesión de terapia sea personalizada, efectiva y cómoda para tu pequeño.

Dale a tu hijo el apoyo que necesita para crecer y desarrollarse con confianza. ¡Transforma su día a día con nuestro sistema de bipedestación!

● Como solicitar el bipedestador CAMPUS RELAX:

Sistema de bipedestación pediátrico con abducción ajustable hasta 30° por miembro, permitiendo un cambio de posición de prono a supina mediante un pistón hidráulico accionado por pedal. Equipado con respaldo con controles de tronco fijos y rebatibles, apoyabrazos posteriores, y soporte de glúteos posterior con pivót de regulación infinita y controles laterales. Incluye pechera y cinturón pélvico para mayor seguridad. El sillín esparcidor es continuamente ajustable para un posicionamiento óptimo. Los soportes de rodilla, ya sean planos o tipo SHARK, ofrecen regulación en dos partes, brindando un soporte seguro y cómodo a la rótula durante la bipedestación. Los apoyapiés son regulables en rotación, profundidad y flexión dorso-plantar. Además, cuenta con una mesa terapéutica ajustable para mayor funcionalidad.

Campus Relax

BEROLKA
bewegt

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Strap de cadera y sujeciones torácicas



Apertura de piernas independiente de 30°



Controles con multiples puntos de ajuste



Soporte anterior para rodillas ajustable plano



Soporte anterior para rodillas ajustable SHARK



Apoya pie con multiples puntos de ajuste

MEDIDAS

-  **Talle 1 (80 a 110 cm) ***
- Talle 2 (100 a 130 cm) ***
- Talle 3 (120 a 150 cm) ***
- Tolerancia de +/- 5 cm ***
-  **Peso max usuario hasta 70 kg**
-  **Abducción de piernas 30°**
-  **Reclin. de 0° a 90°**

Baffin automatic



BIPEDESTADOR MULTIFUNCIONAL

● Dispositivo multifuncional de posicionamiento pediátrico:

Un solo equipo, múltiples soluciones. Este sistema combina asiento y soporte en una única herramienta que permite sentar y poner de pie al paciente de forma cómoda, segura y práctica.

Diseñado para centros de rehabilitación, escuelas y hogares, facilita la continuidad de la terapia y mejora la calidad de vida. Sus ajustes personalizados se adaptan a cada usuario y permiten cambiar de posición todas las veces que sea necesario durante el día, sin necesidad de reemplazar el equipo.



Menos complicaciones, más eficiencia. Un verdadero aliado para profesionales y familias en el camino del cuidado y la recuperación.

Con una estructura robusta pero fácil de maniobrar, este dispositivo se adapta al crecimiento del paciente y a los cambios en su tratamiento. Es una inversión inteligente que centraliza funciones, reduce tiempos y mejora el confort, tanto para el usuario como para quienes lo asisten.

● Como solicitar el BAFFIN AUTOMATIC :

Dispositivo Pediátrico multifuncional electrónico para bipedestación, ajustable desde la posición sentado con sistema a supino. Montado sobre una estructura de acero con 4 ruedas con frenos individuales para máxima estabilidad y seguridad. Cuenta con sistema TILT regulable. Permite un ajuste personalizado mediante una "columna" que adapta la espalda del paciente, asegurando soporte ergonómico. La base del asiento dividida facilita la alineación de la pelvis, y los controles ajustables para tronco, cadera y rodilla permiten un ajuste preciso. Incluye mesa terapéutica, sujeción pechera tipo mariposa con 4 puntos de tracción, cinturón individual por pierna, cintas abductoras y cinchas para los pies, proporcionando mayor estabilidad y evitando movimientos excesivos. Su sistema de posicionamiento se adapta al crecimiento y necesidades del paciente, garantizando un soporte eficiente y personalizado.



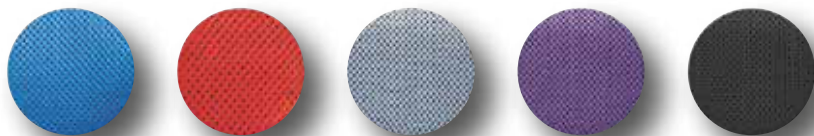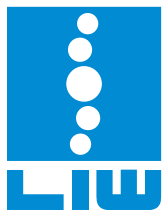

Baffin automatic

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Segunda Columna
totalmente regulable



Controles y ajustes
personalizables



Apoya pie con multiples
puntos de ajuste



Apoya cabeza modela-
ble y regulable



Sedestación, a decúbito,
y luego bipedestación.

- Talle S - 80 a 105 cm**
- Reclinación de 0° a 180°
- Ancho cadera 18 - 29 cm
- Profundidad asiento 18 - 28 cm
- Alto respaldo 44 cm
- Peso max usuario hasta 40 kg

- Talle M - 100 a 120 cm**
- Reclinación de 0° a 180°
- Ancho cadera 22 - 33 cm
- Profundidad asiento 21 - 31 cm
- Alto respaldo 52 cm
- Peso max usuario hasta 60 kg

- Talle L - 115 a 140 cm**
- Reclinación de 0° a 180°
- Ancho cadera 22 - 33 cm
- Profundidad asiento 21 - 31 cm
- Alto respaldo 60 cm
- Peso max usuario hasta 60 kg

Baffin Trio 4w



BIPEDESTADOR MULTIFUNCIONAL

● Dispositivo multifuncional de posicionamiento adolescente/adulto:

Un solo equipo, múltiples soluciones. Este sistema combina asiento y soporte en una única herramienta que permite sentar y poner de pie al paciente de forma cómoda, segura y práctica.

Diseñado para centros de rehabilitación, escuelas y hogares, facilita la continuidad de la terapia y mejora la calidad de vida. Sus ajustes personalizados se adaptan a cada usuario y permiten cambiar de posición todas las veces que sea necesario durante el día, sin necesidad de reemplazar el equipo.




Menos complicaciones, más eficiencia. Un verdadero aliado para profesionales y familias en el camino del cuidado y la recuperación.

Con una estructura robusta pero fácil de maniobrar, este dispositivo se adapta al crecimiento del paciente y a los cambios en su tratamiento. Es una inversión inteligente que centraliza funciones, reduce tiempos y mejora el confort, tanto para el usuario como para quienes lo asisten.

⦿ Como solicitar el BAFFIN TRIO 4W:

Dispositivo multifuncional para adultos, electrónico para bipedestación, ajustable desde la posición sentado a supino. Montado sobre una estructura de acero con 4 ruedas con frenos individuales para máxima estabilidad y seguridad. Permite un ajuste personalizado mediante una "columna" que adapta la espalda del paciente, asegurando soporte ergonómico. La base del asiento dividida facilita la alineación de la pelvis, y los controles ajustables para tronco, cadera y rodilla permiten un ajuste preciso. Incluye mesa terapéutica, sujeción pechera tipo mariposa con 4 puntos de tracción, cinturón individual por pierna, cintas abductoras y cinchas para los pies, proporcionando mayor estabilidad y evitando movimientos excesivos. Su sistema de posicionamiento se adapta al crecimiento y necesidades del paciente, garantizando un soporte eficiente y personalizado.



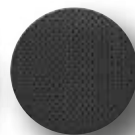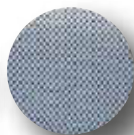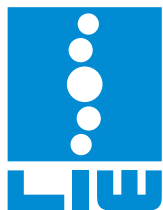

Baffin

Trio 4w

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Segunda Columna
totalmente regulable



Controles y ajustes
personalizables



Apoya cabeza modela-
ble y regulable



Desde sedestación, a decúbito, hasta la bipedestación.

-  **Talle 1 - 135 a 170 cm**
-  Reclinación de 0° a 180°
-  Ancho cadera 27 - 40 cm
-  Profundidad asiento 36 - 50 cm
-  Alto respaldo 61 cm
-  Peso max usuario hasta 40 kg

-
-  **Talle 2 - 160 a 190 cm**
 -  Reclinación de 0° a 180°
 -  Ancho cadera 34 - 45 cm
 -  Profundidad asiento 36 - 50 cm
Profundidad asiento 50 - 64 cm
 -  Alto respaldo 52 o 77 cm
 -  Peso max usuario hasta 60 kg

Lori

**Baby, Junior
& Teen**



BIPE. ANTERIOR Y POSTERIOR



● Bipedestador Anterior y Posterior - Pediátrico a Adulto:

El Lori Stander permite colocar al paciente en posición vertical tanto en prono como en supino, adaptándose a distintos momentos del tratamiento y necesidades individuales.

Su sistema de abducción de miembros inferiores es ajustable de forma independiente para cada pierna (0° a 35°), garantizando una alineación anatómica correcta de la cadera. Esto contribuye a prevenir displasia y otras complicaciones ortopédicas frecuentes.




Además, permite realizar ejercicios de carga diaria, fundamentales para estimular el desarrollo óseo, la estabilidad postural y la participación activa del usuario. Una herramienta confiable para terapeutas, y una aliada esencial para las familias que buscan calidad, seguridad y autonomía en el cuidado diario.

● Como solicitar el Bipe LORI :

Dispositivo de bipedestación multifuncional Anterior y Posterior, con posicionamiento controlado en prono y supino, y sistema de abducción bilateral anatómica ajustable de 0° a 35° , con regulación independiente para cada miembro inferior, lo que favorece el correcto desarrollo de caderas y la prevención de displasia.

Cuenta con soporte torácico y pélvico ajustables en altura, plataforma podálica con regulación 3D y control lateral individual, soportes de cabeza flexibles para estabilidad en ambas posiciones, y bandeja funcional para actividades lúdicas o terapéuticas.

Diseñado para promover ejercicios de carga diaria, mejorar el alineamiento biomecánico y facilitar la participación activa del usuario en la rutina terapéutica.

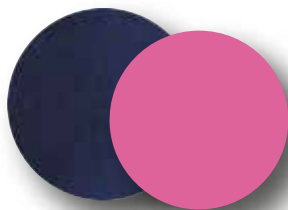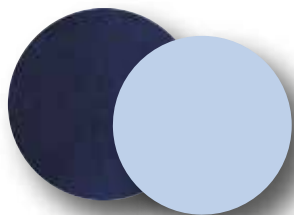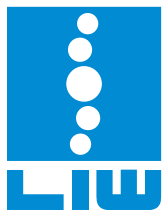

Lori

Baby, Junior & Teen

ACCESORIOS Y MEDIDAS



Abducción y Aducción de caderas de hasta 35°



Controles y ajustes en ángulo e inclinación



Apoya pie con multiples puntos de ajuste



Apoya cabeza modelable, anterior y/o posterior



De decúbito a bipedestación; anterior como posterior.

Baby - 65 a 100 cm

-  Reclinación de -8° a 90°
-  Ancho de controles 12 - 20 cm
-  Abduccion MMII 34° max.
-  Peso max usuario hasta 35 kg

Junior - 90 a 135 cm

-  Reclinación de -15° a 90°
-  Ancho de controles 17 - 25 cm
-  Abduccion MMII 34° max.
-  Peso max usuario hasta 50 kg

Teen - 180 cm

-  Reclinación de -2° a 88°
-  Ancho de controles 20 - 38 cm
-  Abduccion MMII 34° max.
-  Peso max usuario hasta 75 kg

INKLUS



BUTACA VEHICULAR INKLUS



Butaca para transporte vehicular INKLUS:

Porque cada viaje también es una forma de cuidar.

INKLUS fue diseñada para acompañar a niños con necesidades especiales con la seguridad, el confort y la contención que merecen. Cumple con la normativa europea ECE R129/04 S, el estándar más exigente para sistemas de retención infantil en vehículos, brindando tranquilidad en cada trayecto, corto o largo.

Aprobada como sistema de retención categoría "S", INKLUS integra accesorios cuidadosamente diseñados —soportes laterales, almohadillas de cadera, apoyacabezas y apoyapiés— todos probados y certificados para ofrecer estabilidad, correcta postura y confort durante el viaje.

Cada detalle fue pensado sin atajos: más de 40 pruebas de impacto avalan su nivel de protección. Porque cuando se trata de un niño, la seguridad no es una opción, es una decisión.


Como solicitar la Butaca INKLUS :

Butaca vehicular homologada según normativa europea ECE R129/04 S, aprobada como sistema de retención infantil para niños con necesidades especiales (categoría "S"). Cuenta con rotación 360°, facilitando la transferencia y el posicionamiento dentro del vehículo. Permite uso a contramarcha para niños de 61 a 105 cm y a favor de la marcha desde los 76 cm.

Incorpora ganchos ISOFIX regulables, asegurando una instalación estable y precisa. Incluye mesa frontal, utilizada como elemento de contención y soporte funcional según indicación clínica.

Dispone de sistemas de posicionamiento y soporte postural que incluyen: soportes laterales rígidos, arnés, apoyacabezas, cuña de abducción, cojines internos y almohadillas de cadera para ajuste de profundidad y ancho del asiento.

El sistema de apoyapiés con base conjunta permite regulación infinita de altura y ángulo, optimizando el alineamiento postural. El respaldo es regulable en altura y cuenta con inclinación aproximada de 10°.

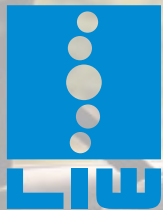

InKlus

ACCESORIOS Y MEDIDAS

Ventajas de la butaca INKLUS:

Rotación 360° para fácil acceso y Reductor de tamaño.

Plataforma de apoyapiés con ajuste de altura y ángulo, para mayor estabilidad y confort.

Orientación a contramarcha para niños de 61 a 105 cm de altura.

Sistemas de posicionamiento y soporte: controles laterales rígidos, arnés, mesa y cuña de abducción.

Tilt de 10° y respaldo regulable en altura.



Altura de respaldo

30 a 50 cm

Altura de apoya cabezas

52 a 73 cm

Profundidad de asiento

17 a 32 cm

Ancho de asiento

25 a 30 cm

Alto de apoya pies

19 a 32 cm

Peso máximo

40 kg

LeviCare

Q140 / J160mini
& J190



GRUAS MOVILES MODULARES

● Gruas Moviles Modulares LEVI:


El LeviCare es un sistema versátil que se adapta a cualquier espacio. Su innovador sistema de instalación permite utilizar una grúa con múltiples bases. El dispositivo puede utilizarse como grúa de transporte, para baños, inodoros o piscinas. Las grúas son una solución común para el traslado en puertos o establos, permitiendo el traslado de personas a caballos, kayaks, barcos, veleros o lanchas motoras.



El chasis, junto con la alimentación por batería, permite utilizar la grúa LeviCare como grúa móvil. Consta de dos elementos desmontables: un mástil y el chasis. Su fijación al chasis es extremadamente sencilla y sus componentes de alta calidad facilitan su traslado. El chasis cuenta con patas ajustables que permiten un acceso sin problemas debajo de una silla de ruedas, una bañera, un sillón o una cama. Es ideal para viajes fuera de casa.

● Como solicitar GRUA MOBIL MODULAR LEVI:

Se solicita la provisión de grúa de transferencia, indicada para la asistencia segura en movilización y transferencias dentro del domicilio. Permite realizar transferencias seguras desde y hacia cama, silla de ruedas, sillón, baño y otros planos de apoyo, reduciendo el riesgo de caídas y facilitando el cuidado diario. El equipamiento cuenta con sistema de elevación asistido, control de fácil uso, estructura estable y compatibilidad con arneses adecuados, asegurando una correcta distribución del peso durante toda la maniobra. El equipo incorpora Extended Lift System®, sistema de elevación con rango funcional ampliado de 60 cm a 180 cm, que permite realizar transferencias desde niveles bajos —incluyendo levantamiento desde el suelo— así como descensos controlados hacia superficies inferiores como bañeras u otros entornos adaptados.

El sistema puede incluir, como opcional, dos marcos de fijación mural que permiten instalar la grúa en distintos ambientes del domicilio y trasladarla de manera simple entre ubicaciones.

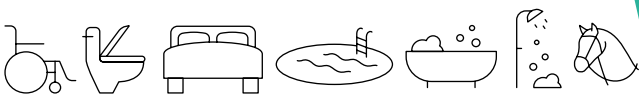

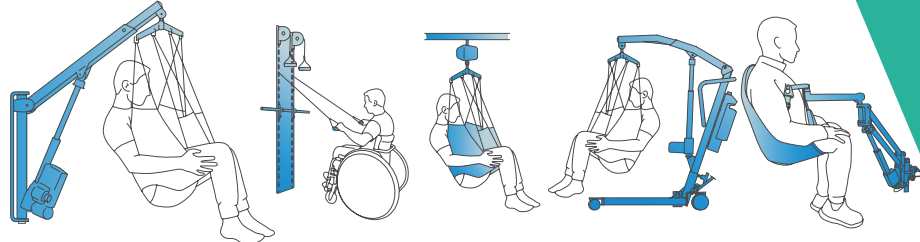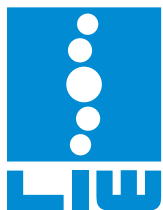

LeviCare
Q140 / J160mini
& J190

ACCESIBILIDAD ADAPTADA



SKSROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

SILLA MOTORIZADA CON BIPEDESTACION

● Silla de Ruedas con Bipedestación SWISS VIVA JUNIOR S:

El mundo, desde otro lugar. Mirar el mundo de pie cambia la forma de vivirlo.

La Swiss Viva Junior S es una silla de ruedas eléctrica multiposición diseñada para niños y adolescentes que necesitan algo más que desplazarse. Su sistema de bipedestación permite una posición terapéutica segura y funcional, con beneficios reales: mejor respiración, mejor circulación y una activación muscular que acompaña el crecimiento.

Pero no se trata solo de técnica.

Se trata de volver a participar, de estar presente y de compartir el día a día a la altura de los ojos, con mayor independencia y confianza. Porque cuando el cuerpo está mejor posicionado, la vida se siente más accesible.

Pensada para adaptarse a cada etapa del desarrollo, la Swiss Viva Junior S combina funciones terapéuticas avanzadas con un uso práctico en la vida cotidiana. Sus sistemas de tilt en el espacio, reclinación, elevación de apoyapiés y bipedestación permiten múltiples configuraciones, favoreciendo el confort, la postura y la participación activa del usuario.

En términos de movilidad y seguridad, incorpora doble motor, suspensión independiente por lado y la capacidad de superar obstáculos de hasta 7 cm, ofreciendo estabilidad y confianza en distintos entornos. La electrónica configurable permite diversas formas de control y manejo, adaptándose a las capacidades de cada niño mediante distintos joysticks, controles alternativos y aditamentos.

Compacta, robusta y pensada para crecer con el usuario, la Swiss Viva Junior S es una solución integral que acompaña el desarrollo y facilita la vida cotidiana.





SKS ROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

ACCESORIOS Y MEDIDAS

► Como solicitar la SWISS VIVA JUNIOR:

Se solicita la provisión de silla de ruedas motorizada pediátrica multiposición con función de bipedestación terapéutica, indicada para niños y adolescentes que requieren un equipamiento integral que acompañe su desarrollo funcional, postural y social.

El equipo permite bipedestación eléctrica segura desde posición sentada o reclinada, respetando los rangos articulares de miembros inferiores, con beneficios funcionales comprobados sobre la función respiratoria, la circulación, el tono muscular y la alineación postural. Asimismo, la combinación de tilt en el espacio, reclinación de respaldo y elevación de apoyapiés posibilita múltiples configuraciones terapéuticas, facilitando el confort, el descanso y la prevención de complicaciones asociadas a la sedestación prolongada.

El equipamiento puede incorporar tracción central, optimizando el radio de giro y la maniobrabilidad en espacios reducidos, y tracción anterior, priorizando la potencia, la estabilidad direccional y el desempeño en exteriores. A esto se suma un sistema de doble motor con suspensión independiente por lado, integrado dentro del **Sistema SWISS Adaptive Motion®**, que garantiza estabilidad, absorción de irregularidades y capacidad para superar obstáculos de hasta 7 cm, adaptándose a las condiciones reales del entorno urbano.

Sistema electrónico altamente configurable, permitiendo seleccionar distintos modos de conducción y sistemas de control, incluyendo joystick convencional, controles alternativos (mentón, mirada u otros dispositivos) y configuraciones personalizadas. Los joysticks y apoyabrazos retráctiles, junto con la posibilidad de incorporar dispositivos especiales, facilitan el acceso, la transferencia y el uso cotidiano.

El equipamiento se configura a medida del usuario, incorporando soportes anteriores de rodillas automatizados, elemento clave para una bipedestación segura, alineada y funcional, diferenciándose de soluciones genéricas o sobredimensionadas. Esta capacidad de personalización permite responder a necesidades clínicas específicas sin comprometer el manejo ni la estabilidad.

El diseño del equipo es modular y escalable, con múltiples ajustes que permiten que la silla crezca junto al usuario, acompañando las distintas etapas del desarrollo sin perder funcionalidad ni seguridad.



PARAMETROS DE SILLA

- ANCHO DEL ASIENTO 27–38 cm
- PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 30 – 40 cm
- ALTURA MÍNIMA DEL ASIENTO 47,5 cm
- TILT DEL ASIENTO AJUSTABLE 0 – 30°
- RECLINACIÓN AJUSTABLE 90 –133°
- ELEVADOR DE ASIENTO ELÉCTRICO 0–30 cm
- REPOSAPIERNAS ELEVABLE ELÉCTRICAMENTE
- MOTOR DE ACCIONAMIENTO 2 x 400 W
- BATERÍAS 2 x 12V / 60 Ah (C20)
- ALTURA MÁXIMA DEL OBSTÁCULO 7 cm
- VELOCIDAD MÁXIMA 8 / 12 km/h
- LONGITUD TOTAL 107/99 cm / ANCHO 59 cm

SKSROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

SILLA MOTORIZADA CON BIPEDESTACION

● Silla de Ruedas con Bipedestación SWISS VIVA GRAND SM / S:

El mundo, a tu altura. Estar de pie cambia la manera de estar en el mundo.

La Swiss Viva Grand SM es una silla de ruedas eléctrica multiposición pensada para personas adultas que necesitan volver a participar activamente, moverse con mayor libertad y relacionarse con su entorno desde otro lugar.

Su función de bipedestación permite adoptar una posición estable y funcional, facilitando una interacción más natural en la vida diaria: en espacios públicos, en actividades sociales o simplemente en lo cotidiano. Porque estar a la altura de los demás no es un detalle técnico, es una forma distinta de vivir.

La Swiss Viva Grand SM combina diseño compacto y maniobrabilidad, logrando desplazarse con soltura tanto en interiores como en exteriores. Su arquitectura está pensada para acompañar cuerpos con necesidades complejas, manteniendo siempre estabilidad, control y confort.

Más allá de la tecnología, esta silla fue desarrollada a partir de la experiencia real de usuarios adultos. Personas que buscan soluciones prácticas, confiables y adaptables, sin perder autonomía ni control sobre su movimiento.

Robusta, precisa y pensada para la vida real, la Swiss Viva Grand SM no solo transporta: acompaña, habilita y devuelve presencia.





SKS ROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

ACCESORIOS Y MEDIDAS

Como solicitar la SWISS VIVA GRAND SM / S (Trac. Central o Trasera):

Se solicita la provisión de silla de ruedas motorizada multiposición para adultos con función de bipedestación terapéutica, indicada para personas con compromiso motor severo que requieren un equipamiento integral que favorezca la autonomía, la funcionalidad y la participación activa en la vida cotidiana, manteniendo condiciones óptimas de seguridad y confort. El equipo permite bipedestación eléctrica segura desde posición sentada o reclinada, respetando los rangos articulares de miembros inferiores, con beneficios funcionales ampliamente reconocidos sobre la circulación, la alineación postural, la tolerancia ortostática y el confort general. Asimismo, la combinación de tilt en el espacio, reclinación de respaldo y elevación de apoyapiés posibilita múltiples configuraciones funcionales, facilitando el descanso, el manejo postural y la prevención de complicaciones asociadas a la sedestación prolongada.

El equipamiento incorpora tracción central, optimizando el radio de giro y la maniobrabilidad en espacios interiores, y tracción anterior, priorizando la potencia, la estabilidad direccional y el desempeño en exteriores. A esto se suma un sistema de doble motor con suspensión independiente por lado, integrado dentro del **Sistema SWISS Adaptive Motion®**, que garantiza estabilidad, absorción de irregularidades y capacidad para superar obstáculos de hasta 7 cm, adaptándose a las condiciones reales del entorno urbano y domiciliario.

El sistema electrónico es altamente configurable, distintos modos de conducción y sistemas de control, incluyendo joystick convencional y controles alternativos (mentón, mirada u otros dispositivos), así como configuraciones personalizadas según las capacidades funcionales del usuario. Los joysticks y apoyabrazos retráctiles, junto con la posibilidad de incorporar dispositivos especiales, facilitan el acceso, las transferencias y el uso cotidiano del equipamiento.

El equipo puede se configura a medida del usuario, incorporando soportes anteriores de rodillas automatizados, elemento clave para una bipedestación segura, alineada y funcional, diferenciándose de soluciones genéricas o sobredimensionadas.



PARAMETROS DE SILLA

-  ANCHO DEL ASIENTO 38–48 cm
-  PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 42,5– 58 cm
-  ALTURA MÍNIMA DEL ASIENTO 47,5 cm
-  TILT DEL ASIENTO AJUSTABLE 0 – 30°
-  RECLINACIÓN AJUSTABLE 90 –133°
-  ELEVADOR DE ASIENTO ELÉCTRICO 0–30 cm
-  REPOSAPIERNAS ELEVABLE ELÉCTRICAMENTE
-  MOTOR DE ACCIONAMIENTO 2 x 400 W
-  BATERÍAS 2 x 12V / 60 Ah (C20)
-  ALTURA MÁXIMA DEL OBSTÁCULO 7 cm
-  VELOCIDAD MÁXIMA 8 / 12 km/h
-  LONGITUD TOTAL 107/99 cm / ANCHO 59 cm

SKSROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

SILLA MOTORIZADA TRACION ANTERIOR

● Silla de Ruedas SWISS VIVA GRAND F:

El camino, sin límites. Avanzar con decisión también es una forma de libertad.

La Swiss Viva Grand F es una silla de ruedas eléctrica multiposición diseñada para personas adultas que necesitan potencia, estabilidad y control en cada desplazamiento, sin resignar confort ni precisión.

Su sistema de tracción delantera transforma la experiencia de movilidad: supera cordones, se adapta a superficies irregulares y mantiene una dirección firme incluso en entornos más exigentes. Calles, senderos, espacios urbanos o recorridos cotidianos dejan de ser un obstáculo y se convierten en parte del recorrido.

Pero no se trata solo de avanzar.

Se trata de hacerlo con seguridad, con estabilidad real y con la confianza de que el equipo responde cuando el entorno cambia.

La Grand F integra las fortalezas del desarrollo suizo de SKS: construcción estructural precisa, ingeniería robusta y una configuración pensada para acompañar necesidades complejas sin sobredimensionar el equipo. Compacta en dimensiones, sólida en desempeño, combina capacidad exterior con maniobrabilidad en espacios reducidos.

Desarrollada a partir de la experiencia concreta de usuarios adultos, esta silla responde a quienes buscan autonomía sostenida, rendimiento confiable y una movilidad que se adapte a la vida real.

Firme, estable y preparada para avanzar,
la Swiss Viva Grand F no solo se desplaza, abre caminos.





SKS ROLTEC

CRAFTED
POWER
WHEELCHAIRS

ACCESORIOS Y MEDIDAS

▶ Como solicitar la SWISS VIVA GRAND F (Trac. Frontal):

Se solicita la provisión de silla de ruedas motorizada multiposición con sistema de tracción anterior, indicada para personas con compromiso motor severo que requieren un equipamiento robusto, preciso y adaptable, orientado a optimizar la movilidad funcional, la estabilidad postural y la participación activa en la vida cotidiana.

El equipo incorpora tracción delantera (frontal), configuración que prioriza la potencia de avance, la estabilidad direccional y el desempeño eficiente en exteriores, facilitando la superación de obstáculos, cordones y superficies irregulares. Esta arquitectura mejora la capacidad de abordaje frontal y permite un desplazamiento seguro en entornos urbanos reales.

Cuenta con doble motor de alto rendimiento y suspensión independiente por lado, integrados dentro del Sistema SWISS Adaptive Motion®, desarrollado para ofrecer absorción precisa de irregularidades, estabilidad estructural y comportamiento dinámico controlado, con capacidad de superar obstáculos de hasta 7 cm sin comprometer seguridad ni confort. La combinación de tilt en el espacio, reclinación, elevación de asiento y regulación eléctrica de apoyapiés permite múltiples configuraciones funcionales, favoreciendo el manejo postural, el descanso, la prevención de complicaciones asociadas a la sedestación prolongada y la adaptación a distintas actividades diarias.

El sistema electrónico es altamente configurable, permitiendo selección de distintos modos de conducción y sistemas de control, incluyendo joystick convencional, joysticks especiales y controles alternativos (mentón, mirada u otros dispositivos), con configuraciones personalizadas según las capacidades funcionales del usuario. Los joysticks y apoyabrazos retráctiles facilitan accesos, transferencias y ajustes operativos cotidianos.

El equipamiento puede configurarse a medida del usuario, incorporando soportes específicos, adaptaciones personalizadas y dispositivos especiales, manteniendo una estructura compacta, equilibrada y funcional, sin sobredimensionar el equipo.



PARAMETROS DE SILLA

-  ANCHO DEL ASIENTO 38–50 cm
-  PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 40– 54 cm
-  ALTURA MÍNIMA DEL ASIENTO 47,5 cm
-  TILT DEL ASIENTO AJUSTABLE 0 – 40°/50°
-  RECLINACIÓN AJUSTABLE 82 –135° / 153°
-  ELEVADOR DE ASIENTO ELÉCTRICO 0–30 cm
-  REPOSAPIERNAS ELEVABLE ELÉCTRICAMENTE
-  MOTOR DE ACCIONAMIENTO 2 x 400 W
-  BATERÍAS 2 x 12V / 60 Ah (C20)
-  ALTURA MÁXIMA DEL OBSTÁCULO 7 cm
-  VELOCIDAD MÁXIMA 8 / 12 km/h
-  LONGITUD TOTAL 110/96 cm / ANCHO 59 cm



ITM

Servicios e insumos
tecnológicos para la movilidad

Charlas de Perfeccionamiento y Actualización

Desde Ortopedia ITM, siempre buscamos el poder trabajar en conjunto y aportar nuestro conocimiento, y herramientas a todos los profesionales que comprenden dicha profesión.

Por ello desarrollamos charlas de Actualización y Asesoramiento para todos los profesionales del rubro. Las mismas NO tienen costo alguno, las dictamos en toda la Argentina y algunos países limítrofes. En las mismas asistimos con nuestros equipamientos y nos basamos en 2 ejes principales el teórico y el práctico, en el cual invitamos a probar los equipos y realizamos evaluaciones en conjunto, logrando así hacer tangible la teoría.

Dichos Cursos y Charlas son dictadas por nuestros profesionales Kinesiólogos, Ortesistas y Protésistas, capacitados y especializados tanto en calzado ortopédico, marcha y sedestación.

No se pierdan la oportunidad de poder hablar con nosotros y coordinar una visita.

Más información por E-mail: info@ortopediaitm.com.ar ó por WhatsApp +54 9 11 2789 4107



ITALOMED Productos S.R.L.

Ricardo Gutiérrez 1226

B1636FXH Olivos Pcia. de Buenos Aires, Argentina

+54 9 11 4897 1048 / 4711 0958

+54 9 11 2789 4107

@itm.nolimits

info@ortopediaitm.com.ar

www.ortopediaitm.com.ar

